

Bruksanvisning

2019-08-16

Optimal förebyggande madrasser

Avser produkterna:

Optimal 5zon[®]

Optimal 5zon[®] L

Optimal 5zon[®] BM

Optimal 5zon[®] Plus

Optimal Care

Optimal Cool

Optimal Cura

Optimal Mono

Optimal Solett

Optimal Solett BM

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001001



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	2
Introduktion	3
Produktbeskrivning och prestanda	6
Uppackning av madrassen	10
Rengöring	11
Övrig information	12
Tillbehör	14

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING!

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
3. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används.
4. Kontrollera alltid att madrassen har avsedd storlek.
5. Madrassen är skyddad med hygienskydd, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med madrassen. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
6. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
7. Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet.
8. Är överdraget utrustat med sidohandtag är dessa till för att lyfta själva madrassen. All annan användning sker på eget ansvar och omfattas ej av produktgarantin.

1 Introduktion



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Denna madrass är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Den uppfyller tillämpliga delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04, SS 876 00 11, SS 876 00 20, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993-1, EN 14126, EN 597-1, EN 597-2.

1.2 Avsedd användning

Optimal förebyggande madrasser används i alla typer av vårdmiljöer för att förebygga trycksår och som hjälpmedel vid behandling upp till kategori 1-2. Optimal 5zon[®], Optimal 5zon[®] L och Optimal Solett används även vid smärterterapi.

Madrasserna Optimal 5zon[®], Optimal 5zon[®] L, Optimal 5zon[®] Plus, Optimal Care, Optimal Cool, Optimal Cura, Optimal Mono och Optimal Solett är kombimadrasser som placeras direkt på sängbotten. Optimal 5zon[®] BM och Optimal Solett BM är bäddmadrasser som placeras ovanpå en befintlig madrass.

Madrasser försedda med Evac-överdrag har förstärkta handtag och kardborreband att användas vid evakuering. Är överdraget utrustat med sidohandtag är dessa till för att lyfta själva madrassen med. All annan användning sker på eget ansvar och omfattas ej av produktgaranti.

Vi rekommenderar att lägesändringar utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal, beroende på brukarens status, diagnos och allmäntillstånd.

1.3 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madrassguiden

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. Optimal förebyggande madrasser är madrasser i funktionsgrupp B. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

1.4 Evac-instruktion


Evac är ett madrassöverdrag med inbyggd funktion för evakuering av sängliggande brukare. Vid en brand eller annan akut fara finns ingen tid att fundera över vad som skall göras. Därför är det viktigt att såväl säkerhetsutrustning som handlingsmetoder är väl genomtänkta och lätta att lära sig - i förväg.

Evac är utrustat med tre handtag på kortsidorna. På långsidorna finns handtag med inbyggda kardborreband, som används för att snabbt fixera (spänna fast) brukaren innan evakueringen påbörjas. Banden ligger invikta i skyddande fickor med yttersta änden något utstickande, för att lätt kunna dras ut.

Varning!


Person som skall utföra en evakuering måste ha tillbörlig utbildning. Kontrollera alltid utrustning, överdrag och madrass före en evakuering, för att säkerställa att en evakuering kan utföras säkert.

Handhavande vid evakuering

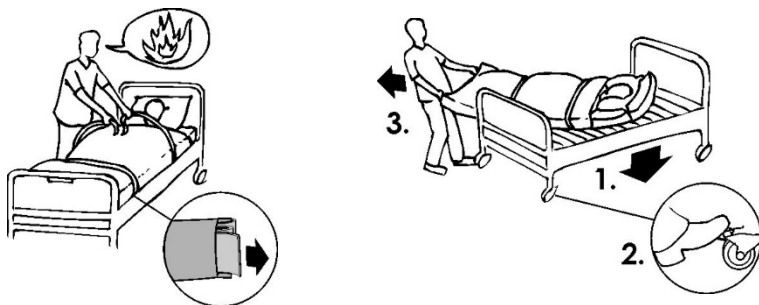

Ned från säng

- Informera brukaren kort om vad som skall ske.
- Sänk och lås fast sängen.
- Dra ut och fäst ihop kardborrebanden så att madrassen bildar en "tub".
- Ta tag i de yttre handtagen i fotänden och vrid ut madrassen.
- Dra långsamt ned brukaren på golvet.

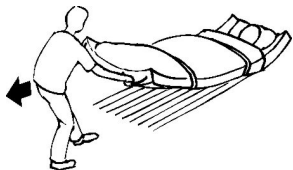

Dra på plant underlag

- Dra i de yttre handtagen i fotänden.
- Arbetsställningen skall vara något bakåtlutad.

Ned för trappa

- Gå baklänges nedåt tills större delen av madrassen glidit över första trappsteget.
- Vänd dig med ryggen mot brukaren och titta i färdriktningen.



- Håll i trappträcket med ena handen och i mittersta handtaget med den andra.
- Gå ner för trappan. Det är viktigt att fartkontroll bibehålls. Detta är den svåraste delen i evakueringen och bör genomföras med stor försiktighet och endast av personer som övat innan.

Träning/övning

Att tänka på vid praktisk träning och övning.

Drag ned från säng:

- Personen som ligger i sängen bör ej ligga högst upp vid sängens huvudände - risk för att huvudet slår i sängkanten vid neddragningen.

Drag i trappor:

- Börja med att dra en madrass utan någon person liggande på, för att lära in tekniken.
- Vid träning med person liggande på madrassen kan ett snöre/band dras igenom handtagen i huvudändan. En person kan då gå bakom och snabbt hjälpa dragaren om problem uppstår.
- Öva helst i samma trappa som en verklig evakuering kan komma att genomföras i.

Allmänt:

- Huvudsyftet med träningen är inte att få så hög hastighet som möjligt, utan att lära in tekniken.

Övningslakan/-överdrag

- På grund av den hårda belastningen vid evakuering ska handtag och sömmar kollas efter övningens slut. Vi rekommenderar att ett uppmärkt "Övningslakan" används, som endast är avsett för övning.

Förklaringar

- Drag i fotänden ned från sängen gör att "röjning" kring huvudänden ej behövs.
- Om kardborrebanden ej används finns risk för att brukaren glider/rollar av madrassen.
- Drag i fotänden minskar belastningen på dragaren, vilket innebär att man drar snabbare och orkar mer.
- Drag nedför trappor är den svåraste delen i evakueringen och bör övas extra noga.
- Armarna på brukaren skall vara innanför kardborrebanden, då detta minskar risken att brukaren greppar tag i något på grund av rädsla.

Notera!

Vid användning av bredare madrasser för exempelvis tyngre brukare bör eventuella hinder inom evakueringsvägen kontrolleras (storlek på dörrar etc.). Ansvarig personal skall i förhand säkerställa att en evakuering kan utföras säkert. För att säkerställa bibehållen funktion är det viktigt att kontinuerligt kontrollera madrassens kvalitet gentemot sättningar och andra brister som kan orsaka skador och problem vid en evakuering.

2 Produktbeskrivning och prestanda

Optimal-madrasserna finns tillgängliga i följande storlekar som standard. Bredderna är 80/85/90/105/120 cm. Längderna är 200/205/210 cm. Önskas andra storlekar, kontakta Care of Sweden.

För mer information om produkterna kontakta oss på 0771-106 600, info@careofsweden.se eller besök vår hemsida www.careofsweden.se.

2.1 Förklaring överdrag

Samtliga överdrag är så kallade hygienöverdrag. De är enkla att hantera och sköta och klarar högt ställda krav på rengöring och hygien. Skydden är ångpermeabla, det vill säga att ånga transporteras bort vilket minskar risken för hudmaceration.

Överdrag Olivia - Ett avtagbart överdrag med dragkedja på tre sidor, droppskyddad dragkedja. Finns i flera olika höjder. Färg grå.

Överdrag Olivia H - Samma som överdrag Olivia men med förflyttningshandtag.

Överdrag Olivia/Evac - Överdrag utrustat med droppskyddad, delbar dragkedja och funktionshandtag för evakuering, förflyttning och transport. Färg grå/svart.

Överdrag Olivia/5zon® Plus – Som Evac överdrag men utan handtag för evakuering på underdelen. Handtag på fyra sidor, används för transport av madrass. Färg grå/svart.

Överdrag Nordic - Överdrag med svetsade sömmar, dragkedja tre sidor. Handtag på en långsida, för transport av madrass. Färg blå.

Överdrag Skandic - Överdrag med svetsade sömmar, dragkedja en kortsida. Färg blå.

Övriga överdrag

Överdrag Quilt - Quiltat överdrag med dragkedja på tre sidor.

Toppdel LF (lågfriktion) – Med ökad "glidfunktion". Kan användas till tunga, orörliga brukare. Passar till underdel till Evac överdrag.

2.2 Beskrivning produkter

Optimal 5zon®

En kombimadrass som placeras direkt på sängbotten. Madrassen ger en mycket god tryckutjämning och är utrustad med vår unika sittfunktion.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår upp till kategori 2, samt vid smärtterapi.

Kärna: Kallskum 65 kg/m³ + 50 kg/m³

Höjd: 14 cm

Överdrag: Olivia/Evac, Olivia, Olivia H, Nordic, Quilt, LF/Evac och Stone

Brukarvikt: 0-180 kg

Garanti: 3 år



Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

Optimal 5zon® L

En kombimadrass som placeras direkt på sängbotten. Madrassen ger en mycket god tryckutjämning.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår upp t o m kategori 2, samt vid smärtterapi.

Kärna: Kallskum 65 kg/m³ + 50 kg/m³

Höjd: 14 cm

Överdrag: Olivia/Evac

Brukarvikt: 0-180 kg

Garanti: 3 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

Optimal 5zon® BM

En mjuk och följsam bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass. Madrassens unika design ger goda tryckutjämnande egenskaper.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår upp t o m kategori 2, samt vid smärtterapi.

Kärna: Kallskum 65 kg/m³

Höjd: 6 cm

Överdrag: Olivia och Quilt

Brukarvikt: 0-150 kg*

Garanti: 2 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten.

Optimal 5zon® Plus

En kombimadrass som är speciellt framtagen för tunga brukare. Madrassen är utrustad med vår unika sittfunktion.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 2

Kärna: Kallskum 65 kg/m³ + 50 kg/m³

Höjd: 15 cm

Överdrag: Olivia/5zon® Plus och Stone/5zon® Plus

Brukarvikt: 0-300 kg (för brukarvikter upp till 180 kg rekommenderas Optimal 5zon®)

Garanti: 2 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år



Optimal Care

En skuren madrass i zoner tillverkad av höglastiskt kallsaum. En kombimadrass som läggs direkt på sängbotten.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 2

Kärna: Kallsaum 50 kg/m³

Höjd: 14 cm

Överdrag: Olivia/Evac, Olivia, Olivia H, Nordic, Quilt, Nordic och LF/Evac

Brukarvikt: 0-160 kg

Garanti: 3 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

Optimal Cool

En enkel och funktionell förebyggande madrass med en profilerad yta. En kombimadrass som placeras direkt på sängbotten.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 1

Kärna: Kallsaum 35 kg/m³

Höjd: 13 cm

Överdrag: Olivia och Nordic

Brukarvikt: 0-110 kg

Garanti: 2 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 3 år

Optimal Cura

En tvåskiktsmadrass bestående av viskoelastiskt skum (så kallat trögskum) och kallsaum. En kombimadrass som läggs direkt på sängbotten.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 1

Kärna: Kallsaum + trögskum 50 kg/m³

Höjd: 13 cm

Överdrag: Olivia/Evac, Olivia, Olivia H, Nordic, Quilt och Skandic

Brukarvikt: 0-130 kg

Garanti: 3 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

Optimal Mono

En skuren madrass i zoner tillverkad av höglastiskt kallsaum. En kombimadrass som läggs direkt på sängbotten.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 2

Kärna: Kallsaum 45 kg/m³

Höjd: 14 cm

Överdrag: Olivia/Evac, Olivia, Nordic och Quilt

Brukarvikt: 0-160 kg

Garanti: 3 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

Optimal Solett

Speciellt framtagen för lätta och känsliga personer. Madrassen är en kombimadrass som placeras direkt på sängbotten.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 1, samt vid smärtterapi.

Kärna: Kallskum 35 kg/m³ och trögskum 50 kg/m³

Höjd: 12 cm

Överdrag: Olivia/Evac, Olivia och Quilt

Brukarvikt: 0-60 kg

Garanti: 2 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

Optimal Solett BM

En mjuk och följsam bäddmadrass som är speciellt framtagen för lätta och känsliga personer. Madrassen placeras ovanpå befintlig madrass.

Funktion: Förebyggande och som hjälpmedel vid behandling av trycksår t o m kategori 1, samt vid smärtterapi.

Kärna: Kallskum 35 kg/m³ och trögskum 50 kg/m³

Höjd: 6 cm

Överdrag: Olivia och Quilt

Brukarvikt: 0-60 kg*

Garanti: 2 år

Beräknad livslängd för denna produkt är 5 år

*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten.

3 Uppackning av madrassen

Våra madrasser levereras komprimerade i återvinningsbar plast. Komprimeringen är till för att ni som kund skall få ett paket som är lättare att hantera och för att vi skall minska vår påverkan på miljön genom att minska på transportvolymen.

1. Börja med att kontrollera så att inte godset är skadat. Avlägsna plastpåsen samt eventuellt skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas på grund av risk för skador på hygienöverdraget.
2. Kontrollera alltid så att madrassen är vänd rätt i överdraget. Se märkning på skummet.
3. Rätta till överdraget. Madrasser som levereras med tvådelat Evac- eller 5zon® Plus-överdrag har överdelen på överdraget liggande dubbelvikt på madrassens översida. Lägga ut toppdelen över madrassen och dra igen dragkedjan.
4. Madrassen bör helst ligga upppackad (i plant läge) i cirka två timmar innan den tas i bruk. Dock kan madrassen användas omgående om behov föreligger. Det kan ta upp till en vecka innan madrassen återtagit sin fulla bredd/längd/höjd efter transportkomprimeringen.



4 Rengöring

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

Viktigt!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut. Om produkten är utrustad med Evac-överdrag bör även handtag och band kontrolleras regelbundet. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisning noggrant.

4.1 Madrassöverdrag inklusive inneröverdrag



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdrag som består av flera delar skall separeras innan tvätt. De olika delarna skall tvättas med liknande färger.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

4.2 Madrasskärna



Hygienöverdraget innesluter och skyddar kärnan helt så att rengöring av denna sällan blir nödvändig. Om kärnan trots allt skulle bli smutsig, rengör det smutsiga partiet med ett mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten (till exempel duscha). Pressa sedan ur vattnet varsamt. OBS vrid eller rulla ej madrassen för att få ut vattnet.

Låt madrassen torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Kärnan skall vara helt torr innan den tas i bruk igen. Använd vid behov alkoholbaserat desinfektionsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

5 Övrig information

5.1 Förvaring

Förvara madrassen plant eller varsamt hoprullad/vikt med stängd dragkedja. Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara madrassen så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller annan mekanisk påverkan. Undvik att utsätta madrassen för direkt solljus. Skall madrassen förvaras under lång tid (längre tid än tre månader) rekommenderar vi att madrassen förvaras plant.

5.2 Märkning

Madrasserna är märkta med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer. Även en ruta för egen märkning finns på madrassen (till exempel avdelningsnummer och namn).

5.3 Garanti

Se punkt 2 för respektive produkts garanti. Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam eller felaktig hantering eller skötsel.

5.4 Service och underhåll

Madrassen kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna bruksanvisning.

5.5 Lagning

För instruktioner kontakta Care of Sweden, telefon 0771-106 600.

5.6 Demontering och källsortering

Alla bäddprodukter är helt återvinningsbara och skall sorteras som ”brännbart avfall”. Ingen demontering är nödvändig.

5.7 Retur och reklamationer

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.

5.8 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Läs bruksanvisningen



Funktionsgrupp



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Rekommenderad brukarvikt



Brukarinformation
- kategori



Placeras direkt
på sängbotten



Placeras ovanpå
befintlig madrass



Kan roteras



Kan vändas



Motverkar skjuv



Placeras överst



Placeras underst



Tål ej vattentvätt



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



Klor



Torktumling



Ej torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning

6 Tillbehör

Till dessa madrasser finns ett urval av tillbehör. Här nedan listas dessa.

Benämning och storlek	Art.nr
Topppdel Olivia, 4 cm (Optimal 5zon®, 5zon® L, 5zon® Plus, Care, Cura, Mono Solett)	431-xxxxxx*
Underdel Evac, 11 cm (Optimal 5zon®, 5zon® L, Care, Cura, Mono, Solett)	461-xxxxxx*
Underdel 5zon® Plus (Optimal 5zon® Plus)	481-xxxxxx*
Överdrag Olivia, 7 cm (Optimal 5zon® BM, Solett BM)	29-xxxxxx*
Överdrag Olivia, 13 cm (Optimal 5zon®, Care, Cool, Cura, Mono, Solett)	292-xxxxxx*
Överdrag Olivia H, 13 cm (Optimal 5zon®, Care, Cura)	297-xxxxxx*
Överdrag Nordic, 13 cm (Optimal 5zon®, Care, Cool, Cura, Mono)	287-xxxxxx*
Topppdel LF (Lågfriktion), 4 cm (Optimal 5zon®, Care)	441-xxxxxx*
Överdrag Quiltat, 12 cm (Optimal Cura, Solett)	822-xxxxxx*
Överdrag Quiltat, 15 cm (Optimal 5zon®, 5zon® Plus, Care, Mono)	821-xxxxxx*
Väska till bäddmadrass, 80-90 cm bredd	58-900904
Väska till madrass 80-90 cm bredd, kraftig polyester, svart	58-900902
Väska till madrass 105-120 cm bredd, kraftig polyester, svart	58-900905

*-xxxxxx i artikelnumren betecknar storleken på produkten. Till exempel 29-090200 betecknar ett överdrag Olivia i storleken 90x200 cm.

6.1 Övriga tillbehör

Optimal Förlängningsdel

Förlängningsdelen är ett tillbehör som används för att fylla ut utrymmet som blir om man lägger en kort madrass i en lång säng. Finns i ett flertal olika storlekar beroende på madrassbredd och höjd

Optimal Hygienkudde

Optimal Hygienkudde är utvecklad för sjukvården med goda komfort- och tvätttegenskaper. Levereras med avtagbart hygienskydd. Följande storlekar finns tillgängliga: 35x45, 50x60 och 50x70 cm.

Optimal Sens

En anatomiskt formad sovkudde som ger ett bra stöd för din nacke. Tillverkad av trögskum och levereras med ett avtagbart hygienöverdrag.

Curera® Stödkil

Ett hjälpmedel för positionering och lägesändring. Stödkilen är lätt att använda och försedd med ett avtagbart hygienöverdrag som är ångpermeabelt.

Molly Hälskydd

Ett hjälpmedel framtaget för härlavlastning. Molly ger god komfort vid avlastning av hälar. Brukaren kan fritt röra benet och göra lägesändringar. Levereras med ett avtagbart ångpermeabelt hygienöverdrag. Molly finns i storlekarna Small, Medium och Large.

Curera® Positioneringskuddar

Curera® Positionering är en serie kuddar och kilar som används för att avlasta, positionera och stabilisera brukare i alla typer av vårdmiljöer. Genom att lägesändra och positionera kroppen med stabila kuddar främjas cirkulationen och komforten ökar.

Vid behov av andra tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden eller besök vår hemsida – www.careofsweden.se.



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo