

Bruksanvisning

2018-12-21

CuroCell S.A.M.[®] Switch

Statisk Antidecubitusmadrass

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001301



Innehållsförteckning

| | |
|--------------------------------|----|
| Viktiga säkerhetsföreskrifter | 3 |
| Introduktion | 4 |
| Produktbeskrivning | 5 |
| Installation och uppstart | 6 |
| Rengöring och rekonditionering | 9 |
| Förvaring | 10 |
| Underhåll | 11 |
| Felsökning | 11 |
| Teknisk beskrivning | 12 |
| Reservdelar | 14 |
| Tillval och tillbehör | 15 |
| Garanti | 16 |
| Övrig information | 17 |
| Egna noteringar | 18 |

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

VARNING! För att minimera risken för brand, elektriska stötar eller skada på personer.

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar (exempelvis pump och madrass), tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Pumpen får inte användas i våtutrymmen, eller där den riskerar att komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Hantera aldrig en pump som hamnat i kontakt med vatten/vätska, dra omedelbart sladden ur eluttaget, skicka pumpen för service till auktoriserad servicetekniker.
3. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
4. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används.
5. Använd aldrig produkten om pumpens elsladd eller stickpropp är trasig, om pumpens hölje är skadat, eller om den inte fungerar normalt. Kontakta servicetekniker för genomgång och reparation.
6. Kontrollera regelbundet produktens funktion genom "hand check" se punkt 3.4. Kontrollera också så att komfortinställningen är rätt inställd enligt tabell på pumpen.
7. Om produkten används av brukare som kräver särskild tillsyn (till exempel barn) ska användningen övervakas kontinuerligt.
8. Madrassen är skyddad med hygienskydd, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med madrassen. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
9. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att brukaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
10. Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet.
11. Är överdraget utrustat med sidohandtag är dessa till för att lyfta själva madrassen med. All annan användning sker på eget ansvar och omfattas ej av produktgarantin.

1. Introduktion

CuroCell S.A.M.® är en statisk luftmadrass som kan användas i alla typer av vårdmiljöer och är mycket funktionell och kostnadseffektiv.



Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information

Detta system är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Systemet har bland annat testats och godkänts enligt följande standards: EN 60601-1, SS 876 00 04, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126.

1.2 Avsedd användning

CuroCell S.A.M.® Switch kan användas i alla typer av vårdmiljöer, för att förebygga trycksår samt som hjälpmedel vid behandling till och med kategori 2⁽¹⁾. Rekommenderad brukarvikt är upp till 200 kg.

Den finns som bäddmadrass (CuroCell S.A.M.® Switch, CuroCell S.A.M.® Switch CF10) att placeras ovan på befintlig madrass, eller som kombimadrass (CuroCell S.A.M.® Switch CF16) som placeras direkt på sängbotten.

Vi rekommenderar att lägesändringar av brukaren utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal, beroende på brukarens status, diagnos och allmäntillstånd.

Rengöring av madrassen skall ske mellan varje brukare.

NOTERA!

- Vid användning med positioneringskuddar, läs noga kuddarnas bruksanvisning för att placera brukaren på rätt sätt.
- Vid all användning i kombination med evakueringslakan är det behörig personal som ansvarar för att en evakuering kan utföras på ett säkert sätt.
- Var aktsam vid manövrering av eventuella sidogrindar/skydd på sängen så att madrassen ej kommer i kläm och skadas.
- Madrassen får ej lyftas med brukaren på, eller användas till någon annan form av transport än vid en eventuell evakuering med evakueringslakan.
- Tänk på att underliggande madrass är viktig för produktens funktion.
- Madrassen är olämplig att använda i samband med röntgenundersökningar. Detta på grund av risken för suddiga bilder eller artefakter i bild som kan leda till diagnostiska fel.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

1.3 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.

Madrassguiden

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. CuroCell S.A.M.® Switch är en madrass i funktionsgrupp B. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

2. Produktbeskrivning

2.1 Pump - Framsida

1. Manöverpanel



2. Anslutning slangar.

- Baksida

1. Hängare

2. Huvudströmbrytare (sida)

Används för att stänga av/sätta på pumpen.
Grön lampa indikerar att pumpen är i gång.

3. Elsladd



2.2 Manöverpanel

Komfortvred


Vredet justerar lufttrycket i madrassen. När vredet vrids medurs så ökar lufttrycket i madrassen. Vrider man vredet moturs så minskar lufttrycket i madrassen.

Lämpligt lufttryck ställs in med vredet (1-8). Riktvärden ges i tabellen på pumpen.



2.3 Madrass

1. Celler/luftblåsa
2. Slangar
3. Slanghållare
4. Kopplingar med backventiler
5. Luft/anslutnings slangar

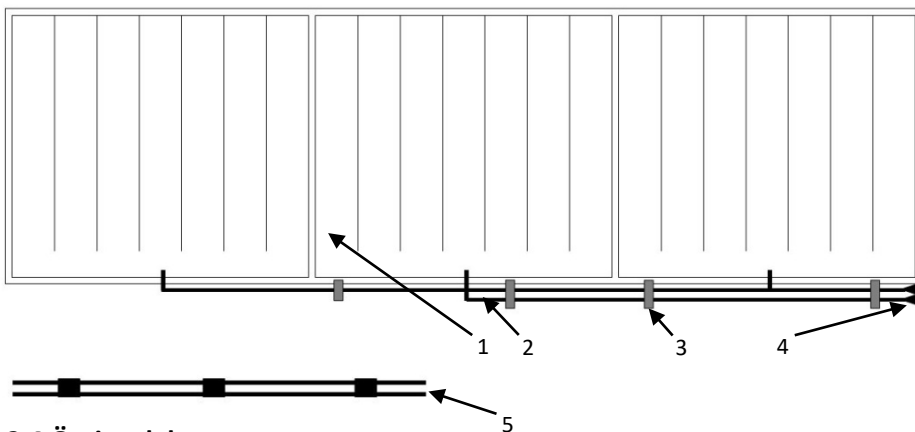

2.4 Övriga delar

Hygienöverdrag

Inneröverdrag Soft (tillbehör CuroCell S.A.M.® Switch)

Transport och förvaringsväska (tillbehör)

Pumpväska (tillbehör)

Integrerad skumkärna (enbart CuroCell S.A.M.® Switch CF16)

3. Installation och uppstart

3.1 Installation

Kontrollera vid upppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

1. Placera madrassen ovanpå befintlig madrass och fäst resårbanden runt den underliggande madrassen.

Notera! Om madrassen har integrerad skumkärna (CuroCell S.A.M.® Switch CF16) läggs madrassen direkt på sängbotten. Fäst madrassen mot sängbotten med banden på överdraget i sängens rörliga delar.

2. Koppla på anslutningsslangarna på madrassen. Dessa skall kopplas på i fotändan på madrassen och genom att hygienöverdraget öppnas. Efter att de anslutits, dra ihop dragkedjan.

3. Häng pumpen på sänggaveln vid fotändan eller ställ den på ett plant, stadigt underlag. Placera elsladden så, att man inte riskerar att snubbla på den eller köra över den med sänghjulen eller att den kommer i kläm vid höjning eller sänkning av sängen.



Notera!

Pumpväska finns som tillval.

4. Anslut luftslangarna från madrassen på pumpens sida.

5. Kontrollera att strömbrytaren på pumpen står på "0" (av). Sätt i stick-proppen i ett godkänt eluttag (220 V).



NOTERA! Bädda madrassen med lakan för ökad komfort.

3.2 Uppstart



NOTERA! Läs alltid bruksanvisningen före användning.



1. Starta pumpen genom att trycks på "1" (på) pumpens sida. Den gröna lampan tänds.
2. Pumpen börjar nu fylla madrassen med luft.
3. När madrassen är fylld är den klar att användas, detta tar cirka 15-20 minuter.
4. Ställ in lämpligt tryck med komfortvredet (1-8). Riktlinjer utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen. Inställningen görs när brukaren ligger på madrassen.
5. Kontrollera inställt tryck med så kallad "hand check", korrigeras vid behov. Se punkt 3.3 och 3.4 för mer information.
6. När trycket är inställt enligt önskemål finns två val.
 - a) Koppla loss luft/anslutningsslangarna från madrassen och stäng sedan av pumpen. Madrassen är utrustad med backventiler som gör att luften stannar kvar i madrassen och inställt tryck kvarstår.
 - b) Ha pumpen tillkopplad och igång konstant.

Notera!

- Kontroll av madrass och pump skall ske regelbundet. Kontroll av madrass sker med hjälp av så kallad "hand check" (se punkt 3.4). Vid behov (koppla till pumpen och) justera trycket med pumpen.
- Om pumpen inte är konstant påkopplad rekommenderar vi att man varje vecka kopplar på pumpen och upprepar punkterna 6a och 6b i punkt 3.2.

3.3 Komfortinställning

Lufttrycket i madrassen kan justeras efter önskemål om komfort. Rådgör dock alltid med din förskrivare eller behörig personal för lämplig inställning.

| kg |  |  |
|---------|---|--|
| 0-20 | 1 | 2 |
| 30-50 | 2 | 3 |
| 60-70 | 3 | 4 |
| 80-90 | 4 | 5 |
| 100-120 | 5 | 6 |
| 130-150 | 6 | 7 |
| 160-180 | 7 | 8 |
| 190-200 | 8 | 8 |

NOTERA!

- Vid all användning där huvudända på sängen höjs skall trycket ökas minst ett (1) steg.
- När enbart delar av madrassen belastas, till exempel för amputerade brukare, bör trycket höjas (1-2 steg).
- Rekommenderad brukarvikt är upp till 200 kg.

3.4 Hand check, kontroll av inställt tryck

Hand check används för att kontrollera att madrassen har rätt inställning. Detta skall göras regelbundet, förslagsvis en gång per arbetspass samt vid positionsändring eller vid ändring av komfortinställningen.

Öppna överdraget. Stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att brukaren inte "bottnar", utan har marginal kvar till underliggande madrass. Vi rekommenderar en till två fingrars marginal.



Är marginalen för liten, höj komfort inställningen till närmaste övre nivån. Vänta tio minuter, gör sedan en ny hand check.

3.5 Tömning av luft (HLR)

Vid HLR (hjärt- och lungräddning) töms madrassen genom att luftslangarna ansluts till madrassen utan att de är kopplade till pumpen. Samma procedur används efter användning, för att tömma madrassen.



3.6 Lågt tryck

Vid ett onormalt lågt lufttryck se avsnittet felsökning, punkt 7.

VARNING!

Om lufttrycket förblir lågt, sök efter skador på madrass och slangar. Reparera vid behov eller kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.

4. Rengöring och rekonditionering

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

4.1 Rengöring

PUMP

VARNING!

Öppna ej pumphuset-fara för elchock. Service och underhåll ska utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker. Blöt inte ner eller doppa pumpen i vätska.



Torka av pumpen med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. Använd vid behov ett desinfektionsmedel såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Om annat medel används, välj ett som inte påverkar plasten på pumphuset.

MADRASSÖVERDRAG



Överdraget kan torkas av med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdrag som består av flera delar skall separeras innan tvätt. De olika delarna skall tvättas med liknande färger.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

INNERÖVERDRAG SOFT (tillbehör)



Punktrengöring kan också göras med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

4.2 Rekonditionering

PUMP

Se instruktion punkt 4.1.

MADRASS

1. Koppla loss slangarna från pumpen och töm madrassen på luft. Anslut luftslangarna till madrassen.
2. Avlägsna överdrag. Se vidare punkt 4.1 för rengöring av överdrag. Om produkten är utrustad med skumdyna skall den tas ur och rengöras separat.
3. Flytta madrassen till rent och lämpligt tvättutrymme.
4. Torka av cellerna, slangar samt CPR-ventilen med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Låt torka.
5. Torka av arbetsytorna med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel avsett för detta ändamål.
6. Sätt ihop madrassen. Om celler av något skäl lossnat från slangarna skall dessa sättas tillbaka enligt ritning punkt 2.3.

SKUMDYNA (CuroCell S.A.M.® Switch CF16)



Punktrengöring med mildt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Pressa ur eventuellt vattnen varsamt. OBS! Vrid eller rulla ej dynan för att få ut vattnet. Låt dynan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den skall vara helt torr innan den tas i bruk igen.

NOTERA!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut. Kontrollera även pumpen, slanganslutningar och elsladd vid rengöring. Skadade delar skall bytas ut eller lagas.

5. Förvaring

Madrass och pump förvaras lämpligast i produktens väska (tillbehör). Hantera den hoppackade produkten varsamt. Ställ ej något tungt ovanpå.

6. Underhåll

1. Kontrollera att elsladden och stickproppen är fria från skador och repor.
2. Kontrollera att madrasskyddet är helt och att överdrag och luftceller är korrekt hopsatta.
3. Kontrollera att luft kommer från utgångarna på pumpens sida.
4. Kontrollera att inga slangar eller kopplingar är trasiga eller klämda.

Kontakta Care of Sweden vid behov av reservdelar.

7. Felsökning

| Problem | Lösning |
|--|---|
| Pumpen startar inte | Kontrollera att elsladden anslutits till eluttag. Kontrollera att ingen säkring har gått. |
| Brukaren bottnar (ligger igenom) | Komfortinställningen kanske är fel inställt. Justera trycket, enligt inställningstabellen, och vänta några minuter. Kontrollera igen med "hand check", se punkt 3.4. NOTERA! Pumpen måste först kopplas till madrassen. |
| Madrassen ligger inte still | Kontrollera att madrassen är fäst vid underliggande madrass med resårbanden, eller om madrassen har en integrerad skumkärna (CuroCell S.A.M.® Switch CF16), fäst med banden mot sängbotten, i sängens rörliga delar. |
| Pumpen låter, eller vibrationer känns | Kontrollera pumpens upphängning på sängen. Resonans i sängens delar kan uppstå. Ta bort pumpen och lyssna om det blir en skillnad. Kan åtgärdas genom att ställa pumpen på ett plant stadigt underlag, eller genom att placera en handduk mellan pump och säng. Pumpväska (tillbehör) kan också användas. |

Om Dina frågor inte besvaras av ovanstående information, vänligen kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.

8. Teknisk beskrivning

8.1 Teknisk specifikation

| PUMP | | SPECIFIKATION |
|-------------------|---------------|---|
| Modell | | CuroCell S.A.M.® |
| Spänning | | 220V-240 V, 50 Hz |
| Strömförbrukning | | 0.05 A |
| Säkringstyp | | T1A1, 250 V |
| Dimension (LxBxH) | | 25 x 12.5 x 8.5 cm |
| Vikt | | 1.4 kg |
| Omgivande miljö | Temperatur | Drift: 10°C - 40°C |
| | | Förvaring: -15°C - 50°C |
| | | Frakt: -15°C - 70°C |
| | Fuktighet | Drift: 10% - 90% icke kondenserande |
| | | Förvaring: 10% - 90% icke kondenserande |
| | Atmosfärtryck | 700 hPa-1013,25 hPa |
| Klassificering | | Klass II, Typ BF, IP21 |
| MADRASS | | SPECIFIKATION |
| Modell | | CuroCell S.A.M.® Switch / CuroCell S.A.M.® Switch CF10 / CuroCell S.A.M.® Switch CF16 |
| Dimension (BxLxH) | | 80/85/90/105/120x200/210x10/16 cm |
| Vikt | | 2.6 kg (85x200 cm) / 8.1 kg (85x200 cm) |

OBS! Care of Sweden förbehåller sig rätten att när som helst modifiera specifikationen för produkten.

WARNING!

Följ drifts- och underhållsanvisningarna noggrant för att förebygga såväl personskador som skador på produkten eller annan utrustning.

8.2 Märkning

Produkten är märkt med produktnamn, tillverkningsdatum, artikel nummer, storlek, skötsel och tvättråd, EAN-nummer. Den har också upp/ner och huvud/fot anvisningar. Även en ruta för egen märkning (till exempel avdelningsnummer och namn).

8.3 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Fotplacering



Läs bruksanvisningen



Funktionsgrupp



CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC



Återvinning



Kastas ej i hushållsavfall, följ
instruktioner för återvinning



Rekommenderad brukarvikt



Brukarinformation - kategori



Placeras direkt
på sängbotten



Placeras ovanpå
befintlig madrass



Motverkar skjuv



Hälfunktion



Tål ej maskintvätt



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



<1%
Klor



Torktumling



Ej torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning



Klass II utrustning
(Dubbelisolerad)




Typ BF



IP-klass (Kapslingsklass)



Temperaturområde

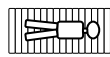

Madrassen ska användas
med brukaren liggande i
längsgående riktning

9. Reservdelar

Till CuroCell S.A.M.® Switch och CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Överdrag Steel, blå

| Art.nr | Storlek |
|------------|------------|
| 294-080200 | 80x200 cm |
| 294-080210 | 80x210 cm |
| 294-085200 | 85x200 cm |
| 294-085210 | 85x210 cm |
| 294-090200 | 90x200 cm |
| 294-090210 | 90x210 cm |
| 294-105200 | 105x200 cm |
| 294-105210 | 105x210 cm |
| 294-120200 | 120x200 cm |
| 294-120210 | 120x210 cm |

Till CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Toppdel Olivia, grå

| Art.nr | Storlek |
|------------|------------|
| 431-080200 | 80x200 cm |
| 431-080210 | 80x210 cm |
| 431-085200 | 85x200 cm |
| 431-085210 | 85x210 cm |
| 431-090200 | 90x200 cm |
| 431-090210 | 90x210 cm |
| 431-105200 | 105x200 cm |
| 431-105210 | 105x210 cm |
| 431-120200 | 120x200 cm |
| 431-120210 | 120x210 cm |

Underdel CuroCell

| Art.nr | Storlek |
|-----------|------------|
| CC-905610 | 80x200 cm |
| CC-905611 | 80x210 cm |
| CC-905612 | 85x200 cm |
| CC-905613 | 85x210 cm |
| CC-905614 | 90x200 cm |
| CC-905615 | 90x210 cm |
| CC-905616 | 105x200 cm |
| CC-905617 | 105x210 cm |
| CC-905618 | 120x200 cm |
| CC-905620 | 120x210 cm |

Cellpaket inkl. slangset, backventiler med snabbkoppling

| Art.nr | Storlek |
|-----------|---------------|
| CC-250510 | 80x200x10 cm |
| CC-250511 | 80x210x10 cm |
| CC-250513 | 85x200x10 cm |
| CC-250514 | 85x210x10 cm |
| CC-250516 | 90x200x10 cm |
| CC-250517 | 90x210x10 cm |
| CC-250518 | 105x200x10 cm |
| CC-250519 | 120x200x10 cm |

| Art.nr | Beskrivning |
|--------------|--|
| CC-250101-E3 | CuroCell S.A.M.®, pump utan snabbkoppling. |
| CC-908034 | Slangset, inkl kopplingsslang |

Vid behov av andra reservdelar, vänligen kontakta Care of Sweden.

10. Tillval och tillbehör

10.1 Tillval

Inneröverdrag Soft

Till brukare som är väldigt känsliga kan inneröverdrag Soft väljas, vilket ytterligare förhöjer komforten i madrassen (ingår i CuroCell S.A.M.® Switch CF10 och CuroCell S.A.M.® Switch CF16). Cellpaketet placeras i inneröverdraget med den mjuka skumsidan upp.

Kraftig transportväska

Transport- och Förvaringsväska.

Överdrag

Med svetsade sömmar.

10.2 Tillbehör

Till CuroCell S.A.M.® Switch och CuroCell S.A.M.® Switch CF10

Inneröverdrag Soft

| Art.nr | Storlek |
|-----------|------------|
| CC-928040 | 80x200 cm |
| CC-928041 | 80x210 cm |
| CC-928043 | 85x200 cm |
| CC-928044 | 85x210 cm |
| CC-928046 | 90x200 cm |
| CC-928047 | 90x210 cm |
| CC-928048 | 105x200 cm |
| CC-928050 | 105x210 cm |
| CC-928049 | 120x200 cm |
| CC-928051 | 120x210 cm |

Art.nr

Storlek

| | |
|-----------|---|
| CC-9091 | Kraftig transport- och Förvaringsväska till CuroCell S.A.M.® Switch |
| CC-9093 | Kraftig transport- och Förvaringsväska till CuroCell S.A.M.® Switch CF 10 |
| 58-900909 | Kraftig transport- och Förvaringsväska till CuroCell S.A.M.® Switch CF16 |
| CC-9098 | Pumpväska, svart |

Till CuroCell S.A.M.® Switch CF16

Inneröverdrag Soft med ficka för skumdyna

| Art.nr | Storlek |
|-----------|------------|
| CC-928060 | 80x200 cm |
| CC-928061 | 80x210 cm |
| CC-928063 | 85x200 cm |
| CC-928064 | 85x210 cm |
| CC-928066 | 90x200 cm |
| CC-928067 | 90x210 cm |
| CC-928068 | 105x200 cm |
| CC-928070 | 105x210 cm |
| CC-928069 | 120x200 cm |
| CC-928071 | 120x210 cm |

10.3 Övriga tillbehör

För bästa komfort rekommenderar vi användning av tillbehör från Care of Sweden eftersom våra produkter är anpassade till att fungera väl ihop. Vid behov av tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden eller gå in på vår hemsida - www.careofsweden.se.

11. Garanti

11.1 Omfattning

Detta CuroCell® system omfattas av 2 års garanti avseende tillverkningsfel. Garantin gäller inte normal förslitning eller vid skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering och skötsel.

11.2 Service och underhåll

CuroCell® madrasserna är medicintekniska produkter, enligt MDD 93/42/EEC, som ska användas förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Därför rekommenderas att produkten regelbundet lämnas in för service och kontroll, så att dess funktion och prestanda bibehålls (läs om Årsservice nedan). En välskött pump arbetar bättre och håller längre, precis som andra tekniska apparater.

Under produktens förväntade livslängd kommer vissa slitagedelar i pumpen att kräva service av en auktoriserad servicetekniker för bibehållen god funktion och prestanda. Omfattning och intervall beror på hur mycket produkten brukas.

Vid en Årsservice blir produkten grundligt kontrollerad och servad av vår serviceavdelning. Filter och förslitningsdelar rengörs/byts vid behov. Kontakta gärna Care of Sweden för mer information.

Service och underhåll ska alltid utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad tekniker. Endast reservdelar godkända av Care of Sweden får användas. Användning av icke godkända reservdelar omintetgör garantin.

Fel eller brister som betecknas som garantifel åtgärdas utan kostnad. Reklamation ska anmälas till Care of Sweden innan en produkt eventuellt återsänds.

11.3 Livslängd

Madrassens förväntade livslängd är 5 år.

12. Övrig information

12.1 Demontering och källsortering

Nästan allt material i CuroCell® produkterna, undantaget vissa delar i pumparna, kan energiåtervinnas genom förbränning vid därför avsedda förbränningsanläggningar.

Pump: Förbrukad CuroCell® pump ska ej tas isär, utan lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Elektronikavfall".

Madrass: Förbrukad CuroCell® madrass lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Brännbart avfall".

Care of Sweden uppfyller sitt producentansvar genom att vara ansluten till REPA-registret och El-kretsen AB. För mer information kontakta Care of Sweden.

12.2 Rekonditionering – Service – Reparation

Kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad serviceenhet vid behov av service eller reparation. Beskriv felet/problemet innan produkten eventuellt återsänds.

Telefon måndag till fredag klockan 8.00 - 16.30: 0771-106 600

Telefon vid akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00):

| | |
|---------|-------------------------|
| Tel: | 0325-101 11 |
| Fax: | 0325-128 40 |
| E-post: | service@careofsweden.se |

12.3 Retur/reklamation

Kontakta Care of Sweden **innan** produkten eventuellt återsänds. Vid fel som faller under produktgarantin bekostas returfrakten av Care of Sweden, i annat fall av kunden.



Tillverkare/Manufactured by

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 146
514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabriksgatan 5A
514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A
514 33 Tranemo