

Bruksanvisning

2021-03-02

CuroCell® Nova CX13

CuroCell® Nova CX19

Växeltrycksystem

Artikelnummer bruksanvisning: 95-001015



Innehållsförteckning

Viktiga säkerhetsföreskrifter	3
Introduktion	4
Produktbeskrivning	6
Montering/Installation	8
Starta	9
Rengöring och rekonditionering	11
Förvaring	12
Underhåll	13
Felsökning	14
Teknisk beskrivning	15
Reservdelar	17
Tillval och tillbehör	18
Garanti	19
Övrig information	20
Egna noteringar	21

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alla instruktioner före användning

WARNING! För att minimera risken för brand, elektriska stötar eller skada på personer.

1. Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra delar (exempelvis pump och madrass), tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan dokumentation från Care of Sweden.
2. Pumpen får inte användas i våtutrymmen, eller där den riskerar att komma i kontakt med vatten eller annan vätska. Hantera aldrig en pump som hamnat i kontakt med vatten/vätska, dra omedelbart sladden ur eluttaget, skicka pumpen för service till auktoriserad servicetekniker.
3. FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas vid kontakt med brandkällor.
4. Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. OBS! var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används.
5. Använd aldrig produkten om pumpens elsladd eller stickpropp är trasig, om pumpens hölje är skadat, eller om den inte fungerar normalt. Var extra uppmärksam för klämskador på sladden där sänggrindar används. Kontakta servicetekniker för genomgång och reparation.
6. Kontrollera regelbundet produktens funktion genom "handcheck" se punkt 4.4. Kontrollera också så att komfortinställningen är rätt inställd enligt tabell på pumpen.
7. Om produkten används av vårdtagare som kräver särskild tillsyn (till exempel barn) ska användningen övervakas kontinuerligt.
8. Madrassen är skyddad med hygienskydd, undvik att använda andra heltäckande plastade skydd i kombination med madrassen. Överdragets ångpermeabilitet kan påverkas.
9. Hygienskyddet är vätske- och lufttätt men är ångpermeabelt (ånga transporteras bort). Se till att vårdtagaren positioneras så att andningsvägarna hålls fria.
10. Undvik skador från vassa föremål på hygienskyddet.
11. Är överdraget utrustat med sidohandtag är dessa till för att lyfta själva madrassen med. All annan användning sker på eget ansvar och omfattas ej av produktgarantin.

1. Introduktion

CuroCell® luftmadrasser arbetar enligt växeltrycksprincipen, en teknik som är mycket väl beprövad och använts under lång tid. Med växeltryck menas att trycket flyttas regelbundet mellan cellerna för att efterlikna kroppens egna rörelser. Man skapar perioder då trycket är lägre eller helt utan tryck, detta ger bra förutsättningar för huden att återhämta sig eller att förebygga skador.



Läs alltid bruksanvisningen före användning.


1.1 Allmän information

Detta system är en medicinteknisk produkt och CE-märkt enligt Medical Device Regulation MDR (2017/745). Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. Systemet har bland annat testats och godkänts enligt följande standarder: IEC 600601-1, IEC 60601-1-2, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2.

1.2 Avsedd användning

CuroCell® är en växeltrycksmadrass som kan användas i alla typer av vårdmiljöer, för att förebygga trycksår samt för behandling till och med kategori 2⁽¹⁾. Den finns i två utföranden, CuroCell® Nova CX13 är en bäddmadrass som ska placeras ovanpå befintlig madrass. CuroCell® Nova CX 19 är en kombimadrass som ska placeras direkt på sängbotten. Madrassen är avsedd att användas för personer med en rekommenderad minsta längd på 120 cm, rekommenderad brukarvikt är upp till 150 kg. Vi rekommenderar att lägesändringar utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av ansvarig personal beroende på vårdtagarens status, diagnos och allmäntillstånd.

Madrassen ska användas med vårdtagaren liggande i längsgående riktning, fötterna placerade enligt anvisning på madrassen.

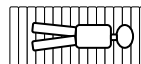

Rengöring av madrassen skall ske mellan varje vårdtagare.

NOTERA!

- För vissa användare, till exempel amputerade vårdtagare, kan det rekommenderade längdmåttet underträdas. Vårdtagare inom dessa grupper kan dock kräva andra inställningar, då hela ytan inte belastas. För funktionskontroll, se punkt 4.3 och 4.4.
- Vid användning med positioneringskuddar, läs noga kuddarnas bruksanvisning för att placera vårdtagaren på rätt sätt.
- Vid all användning i kombination med evakueringslakan är det behörig personal som ansvarar för att en evakuering kan utföras på ett säkert sätt.
- Var aktsam vid manövrering av eventuella sidogrindar/skydd på sängen så att madrassen ej kommer i kläm och skadas.
- Madrassen får ej lyftas med vårdtagaren på, eller användas till någon annan form av transport än vid en eventuell evakuering med evakueringslakan.
- Madrassen är olämplig att använda i samband med röntgenundersökningar. Detta på grund av risken för suddiga bilder eller artefakter i bild som kan leda till diagnostiska fel.

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. *Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline.* Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

1.3 Övrig information

Handlingsplan Trycksår

För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan appliceras vid användning av våra produkter.


Madrassguiden

Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från Care of Sweden. CuroCell® Nova CX13 och CuroCell® Nova CX19 är madrasser i funktionsgrupp C. Denna information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter på sista sidan.

2. Produktbeskrivning

2.1 Pump och madrass


1. Madrass
2. CPR (Snabbtömning)
3. Anslutning pump
4. Pump

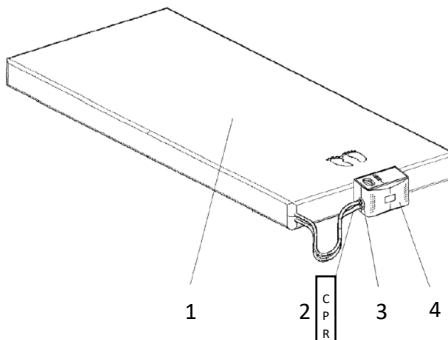

Slangsystem


CuroCell Nova CX13

3 statiska huvudceller. Om produkten är utrustad med ventilerade celler är dessa placerade här (9 stycken).

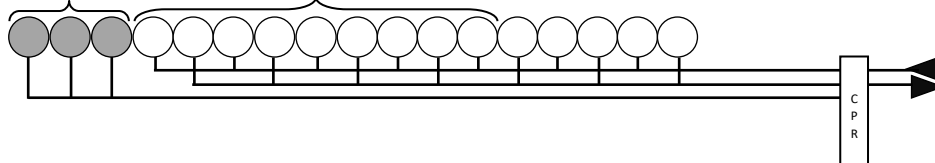


CuroCell Nova CX19 med integrerad skumkärna och slangsystem

3 statiska huvudceller. Om produkten är utrustad med ventilerade celler är dessa placerade här (9 stycken).

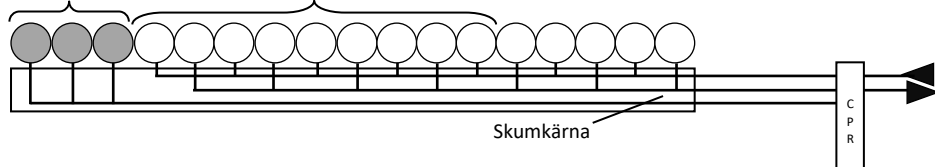

2.2 Pump

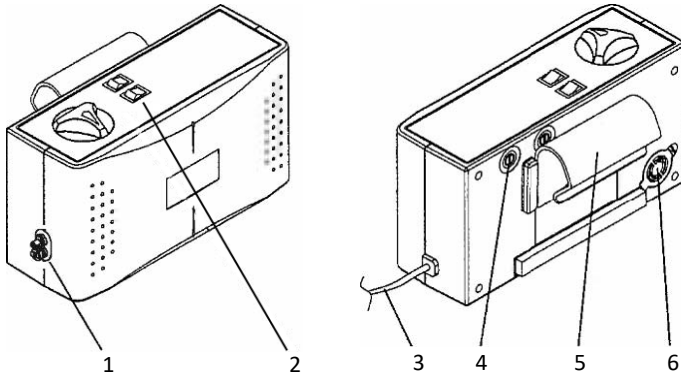


1 Anslutning slangar
2 Funktionsknappar

3 Elsladd
4 Säkringar (två stycken)

5 Upphångningsbygel
6 Filter

2.3 Pumpens funktioner – manöverpanel

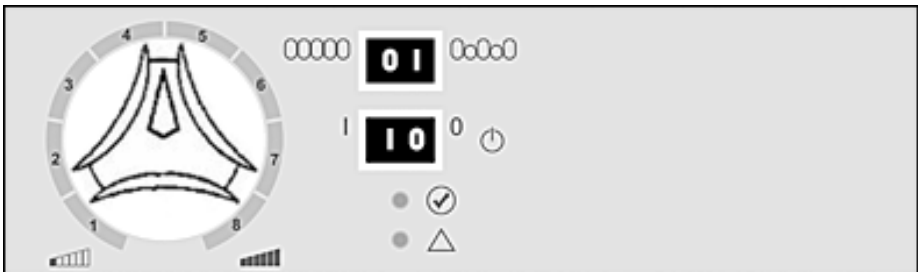

Knapp för växling mellan statisk/växlande (0/1) funktion.



= Läge 1 = Trycket växlar mellan cellerna, en cykel är tio minuter. Vi rekommenderar att detta läge används som grundinställning.



= Läge 0 = Statiskt läge, samma tryck i alla celler. I statiskt läge avbryts alterneringen och trycket utjämnas mellan luftcellerna. Används i samband med omvårdnadsarbete, lägesändringar/förflyttning i och ur säng eller som ett behandlingsläge.



Ström av/på (1/0).



Lämpligt lufttryck ställs in med komfortvredet (1-8). Riktlinjer utifrån brukarvikt ges i tabellen på pumpen. **OBS!** Vid all användning där sängens huvudända höjs skall trycket ökas minst ett (1) steg.




Lampan lyser när madrassen är klar att användas.



Larm vid för lågt tryck. För avhjälpning se punkt 8, felsökning.

3. Montering/Installation

Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of Sweden innan produkten tas i bruk.

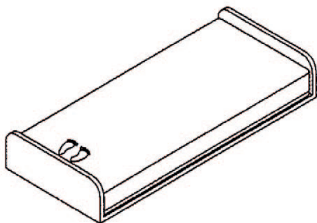


1. Placera madrassen ovanpå befintlig madrass och fäst resårbanden runt den underliggande madrassen.

Om madrassen har integrerad skumdyna (CuroCell® Nova CX19) läggs madrassen direkt på sängbotten. Fäst madrassen mot sängbotten med banden på överdraget.

Notera!


- Bädda madrassen med lakan för ökad komfort.
- Kontrollera att CPR-ventilen är stängd.
- Används justerbar säng skall madrassen fästas enbart i sängens rörliga delar (CuroCell® Nova CX19).
- Kontrollera celler och tryckknappar så att dessa är korrekt hopsatta.

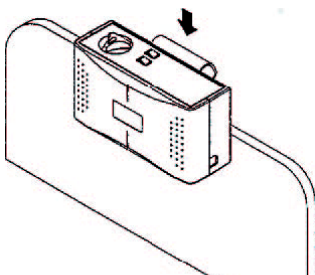


2. Häng pumpen på sänggaveln vid fotänden eller ställ pumpen på ett plant, stadigt underlag.

Placera elsladden så att man inte riskerar att snubbla på den, köra över den med sänghjulen eller klämmer den vid höjning/sänkning av sängen.

Om kabelhållare finns (tillval): öppna knapparna, placera elsladden i fikan och stäng knapparna igen.

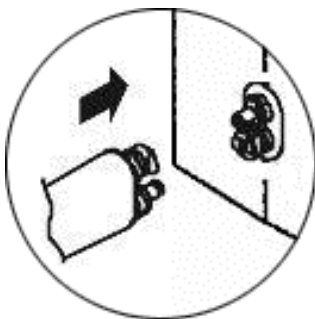

3. Koppla på luftslangarna från madrassen på pumpens sida. När ett "klick" hörs eller känns är snabbkopplingarna rätt hopsatta.

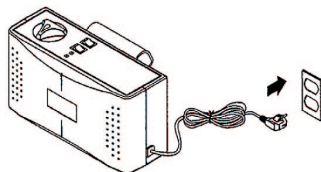

4. Kontrollera att strömbrytaren på pumpen står på 0 (av). Sätt i stickproppen i ett godkänt eluttag (220 V).


4. Starta



Notera! Läs alltid bruksanvisningen före användning.

4.1 Uppstart

1. Starta pumpen genom att trycka på "1" (på).
2. Luft börjar pumpas till madrassen. Det tar cirka 20 minuter innan madrassen är fylld.
3. Om behovet finns kan vårdtagaren ligga på madrassen utan att denna är fylld. Det är då undermadrassen som belastas under fyllnadsfasen. Är undermadrassen av luft måste denna vara helt fylld.

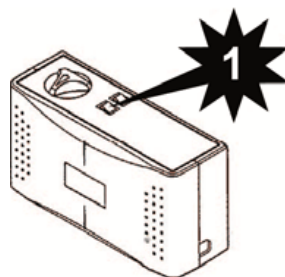

Notera! Vi rekommenderar att komfortvredet ställs på max vid fyllning av tom madrass.

4.2 Val av program

Det finns två olika program, se punkt 2.3 för detaljerad information. Vi rekommenderar det alternerande läget som grundinställning.

4.3 Komfortinställning

Lufttrycket i madrassen kan justeras efter vårdtagarens önskemål om komfort. Rådgör dock ALLTID med din förskrivare eller behörig personal för lämplig inställning.

1. Ställ sedan in lämpligt lufttryck med komfortvredet enligt tabellen på pumpen.
2. När lampan, vid symbolen , lyser är madrassen klar att användas.

kg		
0-40	1	2
50-60	2	3
70-80	3	4
90-100	4	5
110-120	5	6
130-140	6	7
150	7	8

www.careofsweden.se

NOTERA!

- Vid all användning där huvudända på sängen höjs skall trycket ökas minst ett (1) steg.
- När enbart delar av madrassen belastas, till exempel för amputerade vårdtagare, bör trycket höjas (1-2 steg).
- Kontrollera alltid inställt tryck med så kallad "handcheck", se punkt 4.4.
- Rekommenderad brukarvikt är upp till 150 kg.

4.4 Handcheck (funktionskontroll)

Handcheck utförs för att kontrollera att madrassen är korrekt inställd. Detta skall genomföras regelbundet, förslagsvis en gång per arbetspass samt vid positionsändringar eller vid ändring av komfortinställningen.

Stick in en flat hand under cellerna under sätet. Känn efter så att vårdtagaren inte "bottnar", utan har marginal kvar till underliggande madrass. Vi rekommenderar en till två fingrars marginal.

Är marginalen för liten, höj komfortinställningen till närmaste övre steg. Vänta tio minuter, gör sedan en ny handcheck.



4.5 CPR

I händelse av nödläge där HLR (hjärt- och lungräddning) måste utföras på vårdtagaren: Dra snabbt i CPR-bandet, lossa därefter snabbkopplingarna på pumpens sida för snabbast möjliga lufttömning.



Notera! Efter användning, var noga med att CPR-kopplingen sätts fast riktigt.

4.6 Lågt tryck

Vid ett onormalt lågt lufttryck i madrassen lyser lampan vid symbolen . Lampan slocknar när trycket återgått till normalt.

För avhjälpning av fel, se kapitel 8 för felsökning.

WARNING!

Om lufttrycket förblir lågt, sök efter skador på madrass och slangar. Reparera vid behov eller kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.


4.7 Transportfunktion

Om vårdtagaren behöver flyttas i säng kan slangarna kopplas ihop (lossas från pumpen) och madrassen försättas i "Transportläge". Vi rekommenderar att denna funktion enbart används under kortare tid.



4.8 Hälfunktion med ventil (tillval)

Denna funktion gör att man kan avlasta hälen. Detta görs genom att man kopplar ur (stänger ned) den cell i madrassen som befinner sig rakt under hälen. Den kommer då inte att fyllas med luft och det skapas ett mellanrum mellan cellerna som gör att hälen avlastas.

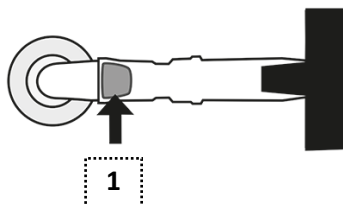

Funktionen aktiveras genom att man trycker på knappen (1) och drar isär kopplingen, låt cellen finnas kvar på sin plats i madrassen. Cellen aktiveras igen genom att kopplingen sätts ihop.



5. Rengöring och rekonditionering

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny vårdtagare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid osäkerhet.

PUMP

VARNING!

- Öppna ej pumphuset – fara för elchock. Service och underhåll ska utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.
- Blöt inte ner eller doppa pumpen i vätska.



Torka av pumpen med fuktig trasa och milt rengöringsmedel, till exempel handdiskmedel. Använd vid behov ett desinfektionsmedel såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Om annat medel används, välj ett som inte påverkar plasten på pumphuset.

MADRASSÖVERDRAG



Överdraget kan torkas av med milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.



Överdrag som består av flera delar skall separeras innan tvätt. De olika delarna skall tvättas med liknande färger.



Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU-ytan negativt och bör undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1 %.

INNERÖVERDRAG OCH DISTANSTYG (tillbehör)



Punktrensning kan också göras med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

5.2 Rekonditionering

PUMP

Se instruktion punkt 5.1.

MADRASS

1. Koppla loss slangarna från pumpen och töm madrassen på luft, öppna även CPR- ventilen.
2. Avlägsna överdrag. Se vidare punkt 5.1 för rengöring av överdrag. Om produkten är utrustad med skumdyna skall den tas ur och rengöras separat.
3. Flytta madrassen till rent och lämpligt tvättutrymme.
4. Torka av cellerna, slangar samt CPR-ventilen med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Låt torka.
5. Torka av arbetsytorna med ett rengörings- och/eller desinfektionsmedel avsett för detta ändamål.
6. Sätt ihop madrassen. Om celler av något skäl lossnat från slangarna skall dessa sättas tillbaka enligt ritning punkt 2.1.

SKUMDYNA



Punktrengöring med milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten eller vid behov med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel avsett för detta ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas.

Pressa ur eventuellt vattnen varsamt. OBS! Vrid eller rulla ej dynan för att få ut vattnet. Låt dynan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den skall vara helt torr innan den tas i bruk igen.

NOTERA!

Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller bytas ut. Kontrollera även pumpen, slanganslutningar och elsladd vid rengöring. Skadade delar skall bytas ut eller lagas.

6. Förvaring

Madrass och pump förvaras lämpligast i produktens väska (tillbehör). Hantera den hoppackade produkten varsamt. Ställ ej något tungt ovanpå.


7. Underhåll

7.1 Allmänt

1. Kontrollera att elsladden och stickproppen är fria från skador och repor.
2. Kontrollera att madrasskyddet är helt samt att överdrag och luftceller är korrekt hopsatta.
3. Kontrollera att luftflödet växlar mellan respektive utgång på pumpens sida.
4. Kontrollera att inga slangar eller kopplingar är trasiga eller klämda.


Kontakta Care of Sweden vid behov av reservdelar.

7.2 Säkringsbyte

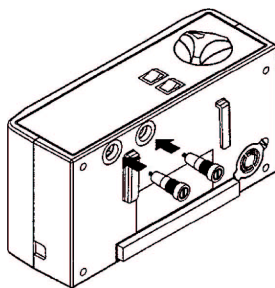

1. Dra ur stickproppen från eluttaget vid byte av säkringar.
2. Ta av locket för säkringen med en skruvmejsel. Dra ur säkringshållaren.
3. Sätt i ny säkring av samma typ (T1A/250 V) och skruva tillbaka skyddslocket. Det finns två säkringar.

7.3 Luftfilterbyte

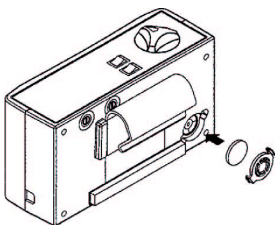

1. Lossa den lilla runda skyddsplattan på pumpens baksida.
2. Luta pumpen bakåt så att filtret glider ur sin hållare.
3. Placera det nya filtret i hållaren och sätt på skyddsplattan.

Om pumpen används i mycket nedsmutsad miljö skall filter kontrolleras regelbundet.

8. Felsökning

Problem	Lösning
Pumpen startar inte	Kontrollera att elsladden anslutits till ett eluttag. Kontrollera säkringarna.
Ingen luft i huvudcellerna	Vid uppblåsning av madrassen fylls de tre statiska huvudcellerna sist av alla celler.
Larm vid för lågt tryck (lampa) = madrassen tappar luft	Kontrollera att luftslangarna är rätt anslutna till pumpen. Kontrollera att CPR-ventilerna är stängda. Öppna madrassen och sök efter eventuellt läckage.
Vårdtagaren bottnar (ligger igenom)	Komfortvredet kanske är fel inställt. Justera upp trycket något och vänta några minuter. Kontrollera att CPR-ventilen är stängd. Sök efter eventuellt läckage från luftceller. Efter åtgärd, kontrollera igen med "handcheck", se punkt 4.4.
Madrassen ligger inte still	Kontrollera att madrassen är fäst med resårbanden mot underliggande madrass eller, om madrassen har en integrerad skumdyna, fäst med banden mot sängbotten.
Vissa celler har mindre luft	Detta är normalt eftersom lufttillförseln växlar mellan varannan cell under en bestämd cykeltid (en cykel = tio minuter).
Cellerna växlar inte	Kontrollera så att "STATIC" knappen inte är intryckt och att alterneringen har avbrutits (omvårdnadsläge har valts).
Pumpen låter, vibrationer känns	Kontrollera pumpens upphängning på sängen. Resonans i sängens delar kan uppstå. Ta bort pumpen och lyssna om det blir en skillnad. Kan åtgärdas genom att ställa pumpen på ett plant underlag eller lägga en handduk mellan pump och säng.
Om dina frågor inte besvaras av ovanstående information, vänligen kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad servicetekniker.	

9. Teknisk beskrivning

9.1 Teknisk specifikation

PUMP		SPECIFIKATION
Modell		CuroCell® Nova
Spänning		220V-240 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning		0.05 A
Säkringstyp		T1A/250 V
Cykeltid		10 min
Dimension (LxBxH)		25 x 13.5 x 9.5 cm
Vikt		1.8 kg
Omgivande miljö	Temperatur	Drift: 10°C - 40°C
		Förvaring: -15°C - 50°C
		Frakt: -15°C - 70°C
	Fuktighet	Drift: 10% - 90% icke kondenserande
		Förvaring: 10% - 90% icke kondenserande
	Atmosfärtryck	700hPa-1013, 25hPa
Klassificering		Klass II, Typ BF, IP2X
MADRASS		SPECIFIKATION
Modell		CuroCell® Nova CX13 / Nova CX19
Dimension (BxLxH)		80/85/90/105/120x200/210x13/19 cm
Vikt		5.2 kg (80x200 cm, 8.5 kg med integrerad skumdyna)

OBS! Care of Sweden förbehåller sig rätten att när som helst modifiera specifikationen för produkten.

WARNING!

Följ drifts- och underhållsanvisningarna noggrant för att förebygga såväl personskador som skador på produkten eller annan utrustning.

9.2 Märkning

Madrasen är bland annat märkt med produktnamn, artikelnummer, tillverkningsdatum, storlek, EAN-nummer samt skötsel- och tvättråd. Den har också upp/ner- och huvud/fot anvisningar. Även ruta för egen märkning finns på madrasen (till exempel avdelningsnummer och namn).

9.3 Symbolförklaring



Artikelnummer



Tillverkare

XXXX-XX-XX

År-Månad-Dag



Fotplacering



Läs bruksanvisningen



Funktionsgrupp



CE-märkt enligt Medical Device Regulation MDR (2017/745)



Återvinning



Kastas ej i hushållsavfall, följ instruktioner för återvinning



Rekommenderad brukarvikt



Vårdtagarinformation – kategori



Placeras direkt på sängbotten



Placeras ovanpå befintlig madrass



Motverkar skjuv



Hälfunktion



Tål ej maskintvätt



Maskintvätt 70 °C



Maskintvätt 95 °C



CL
<1%
Klor



Torktumling



Ej torktumling



Droptorkning



Ej strykning



Ej kemtvätt



Avtorkning



Klass II utrustning
(Dubbelisolerad)




Typ BF



IP-klassning



Temperaturområde

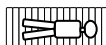

Madrassen ska användas med vårdtagaren liggande i längsgående riktning



Distribueras av



Medicinteknisk produkt



UDI

10. Reservdelar

Till CuroCell® Nova CX13

Art.nr	Beskrivning	Storlek
295-080200	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	80x200 cm
295-080210	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	80x210 cm
295-085200	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	85x200 cm
295-085210	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	85x210 cm
295-090200	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	90x200 cm
295-090210	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	90x210 cm
295-105200	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	105x200 cm
295-120200	Överdrag Olivia, grå, dragkedja på tre sidor	120x200 cm

Till CuroCell® Nova CX19 (madrass med integrerad skumdyna)

Art.nr	Beskrivning	Storlek
CC-906010	Toppdel Olivia, grå	80x200 cm
CC-906011	Toppdel Olivia, grå	80x210 cm
CC-906012	Toppdel Olivia, grå	85x200 cm
CC-906013	Toppdel Olivia, grå	85x210 cm
CC-906014	Toppdel Olivia, grå	90x200 cm
CC-906015	Toppdel Olivia, grå	90x210 cm
CC-906016	Toppdel Olivia, grå	105x200 cm
CC-906018	Toppdel Olivia, grå	120x200 cm
CC-905610	Underdel CuroCell	80x200 cm
CC-905611	Underdel CuroCell	80x210 cm
CC-905612	Underdel CuroCell	85x200 cm
CC-905613	Underdel CuroCell	85x210 cm
CC-905614	Underdel CuroCell	90x200 cm
CC-905615	Underdel CuroCell	90x210 cm
CC-905616	Underdel CuroCell	105x200 cm
CC-905618	Underdel CuroCell	120x200 cm

Art.nr	Beskrivning	Storlek
CC-901001-K	Luftcell, PU	80x13 cm
CC-901002-K	Luftcell, PU	85x13 cm
CC-901003-K	Luftcell, PU	90x13 cm
CC-901004-K	Luftcell, PU	105x13 cm
CC-901005-K	Luftcell, PU	120x13 cm

Vid beställning av ventilerad cell uppges detta vid beställningen.

CC-8217 Säkring, (2-pack)

CC-8202 Filter, engångs

Vid behov av andra reservdelar, vänligen kontakta Care of Sweden.

11. Tillval och tillbehör

11.1 Tillval

Distanstyg (enbart CuroCell® Nova CX19)

Till vårdtagare som är väldigt känsliga för luftväxlingarna kan ett distanstyg väljas, vilket ytterligare höjer komforten i madrassen.

Hälfunktion

Tömning av celler med ventil. **OBS!** Kan endast göras vid nybeställning.

Kabelhållare (enbart CuroCell® Nova CX19)

En ficka längs madrassens ena långsida som håller nätsladden på plats för att minimera risken för fall på grund av sladden, samt att sladden fastnar under sängens hjul. **OBS!** Kan enbart fås vid nybeställning.

Kraftig transportväska

Transport- och förvaringsväska.

Lakanshållare (enbart CuroCell® Nova CX19)

Ett hjälpmedel för att hålla lakanet på plats. Ett spänne som sätts fast i överdraget, sex stycken per madrass.

Ventilerade celler (Low-Air-Loss)

Microventilation i nio av cellerna.

11.2 Tillbehör

Till CuroCell® Nova CX13

Art.nr	Beskrivning	Storlek
CC-9093	Kraftig transportväska	80/85/90 cm
CC-9094	Kraftig transportväska	105/120 cm

Till CuroCell® Nova CX19 (madrass med integrerad skumdyna)

Art.nr	Beskrivning	Storlek
CC-907210	CuroCell Distanstyg	80x200 cm
CC-907211	CuroCell Distanstyg	80x210 cm
CC-907212	CuroCell Distanstyg	85x200 cm
CC-907213	CuroCell Distanstyg	85x210 cm
CC-907214	CuroCell Distanstyg	90x200 cm
CC-907215	CuroCell Distanstyg	90x210 cm
CC-907216	CuroCell Distanstyg	105x200 cm
CC-907218	CuroCell Distanstyg	120x200 cm
58-900909	Kraftig transportväska	80/85/90 cm
58-900905	Kraftig transportväska	105/120 cm

Toppdel CuroCell LF (lågfriktion) (enbart CuroCell® Nova CX19) - Överdrag med ökad "glid"-funktion, till ex: tunga, orörliga vårdtagare.

Art.nr	Beskrivning
CC-9075	Lakanshållare, styckevis
CC-900220	Hälfunktion med ventil (4 celler)
CC-900222	Hälfunktion med ventil (3 celler)

11.3 Övriga tillbehör

För bästa komfort rekommenderar vi användning av tillbehör från Care of Sweden eftersom våra produkter är anpassade till att fungera väl ihop. Vid behov av tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta Care of Sweden eller gå in på vår hemsida - www.careofsweden.se.

12. Garanti

12.1 Omfattning

Detta CuroCell®-system omfattas av 2 års garanti avseende tillverkningsfel. Garantin gäller inte normal förslitning eller vid skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig hantering och skötsel.

12.2 Service och underhåll

CuroCell® växeltrycksmadrass är en medicinteknisk produkt, enligt Medical Device Regulation MDR (2017/745), som ska användas förebyggande och som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår. Därför rekommenderas att pumpen regelbundet lämnas in för service och kontroll, så att dess funktion och prestanda bibehålls (läs om Årsservice nedan). En välskött pump arbetar bättre och håller längre, precis som andra tekniska apparater.

Under produktens förväntade livslängd kommer vissa slitagedelar i pumpen att kräva service av en auktoriserad servicetekniker för bibehållen god funktion och prestanda. Omfattning och intervall beror på hur mycket produkten brukas.

Vid en Årsservice blir pumpen grundligt kontrollerad och servad av vår serviceavdelning. Filter och förslitningsdelar rengörs/byts vid behov. Kontakta gärna Care of Sweden för mer information.

Service och underhåll ska alltid utföras av Care of Sweden eller en av denne auktoriserad tekniker. Endast reservdelar godkända av Care of Sweden får användas. Användning av icke godkända reservdelar omintetgör garantin.

Fel eller brister som betecknas som garantifel åtgärdas utan kostnad. Reklamation ska anmälas till Care of Sweden innan en produkt eventuellt återsänds.

12.3 Livslängd

Beräknad livslängd för dessa produkter är 3 år.

13. Övrig information

13.1 Demontering och källsortering

Nästan allt material i CuroCell®-produkterna, undantaget vissa delar i pumparna, kan energiåtervinnas genom förbränning vid därför avsedda förbränningsanläggningar.

Pump:

Förbrukad CuroCell®-pump ska ej tas isär, utan lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Elektronikavfall".

Madrass:

Förbrukad CuroCell®-madrass lämnas till återvinningsstation. Källsorteras som "Brännbart avfall". Care of Sweden uppfyller sitt producentansvar genom att vara ansluten till REPA-registret och El-kretsen AB. För mer information kontakta Care of Sweden.

13.2 Rekonditionering – Service – Reparation

Kontakta Care of Sweden eller en av denne auktoriserad serviceenhet vid behov av service eller reparation. Beskriv felet/problemet innan produkten eventuellt återsänds.

Telefon måndag till fredag klockan 8.00-16.30: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Telefon vid akuta ärenden, efter kontorstid 0325-101 11
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00)

13.3 Retur/reklamation

Kontakta Care of Sweden **innan** produkten eventuellt återsänds. Vid fel som faller under produktgarantin bekostas returfrakten av Care of Sweden, i annat fall av kunden.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Tillverkare/Manufactured by



SUPPORTING LIFE

Kontakt:

Telefon: 0771-106 600

Fax: 0325-128 40

E-post: info@careofsweden.se

Internet: www.careofsweden.se

**Akuta ärenden, efter kontorstid
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00):**

Telefon: 0325-101 11

Postadress:

Care of Sweden AB

Box 146

514 23 Tranemo

Besöksadress:

Fabrikgatan 5A

514 33 Tranemo

Godsadress:

Byns väg 4A

514 33 Tranemo