

Optimal Mono

Prisvärd kvalitetsmadrass




Optimal Mono med överdrag Nordic

Optimal Mono

Optimal Mono är en prisvärd kvalitetsmadrass som kan användas inom hela vårdsektorn. Madrassen är tryckreducerande och indelad i zoner, vilket förbättrar komfort och support för användaren. Den har även förstärkta sidor vilka ger support vid i och urstigning.

Den unika märkningen, bland annat innehållande brukarinformation och hantering, samt den bifogade bruksanvisningen gör det enkelt att använda madrassen.

Optimal Mono levereras med flera olika alternativ på hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾. Optimal Mono tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

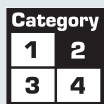

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Olivia/Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida. Även lågfriktionstopp finns som tillval.

Nordic

Svetsade sömmar, droppskyddad dragkedja på tre sidor och handtag på en långsida.

Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

REFERENSER

(1) Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. (2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. Cambridge Media: Perth, Australia.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-08-14.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget "ångandas"⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: Högelastiskt kallskum 45 kg/m³• Höjd: 14 cm• Funktion: Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: 0-160 kg• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 3 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel• Maskintvätt max 95 °C, torktumling
 <p>Madrassväljaren - Guidelines vid val av produkt Läs om hur du väljer rätt madrass på: www.careofsweden.se/madrassvaljaren</p>	<p>STORLEKAR</p> <p>80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.</p>