


# Optimal Solett

Förebyggande ersättningsmadrass  
anpassad för en lägre brukarvikt

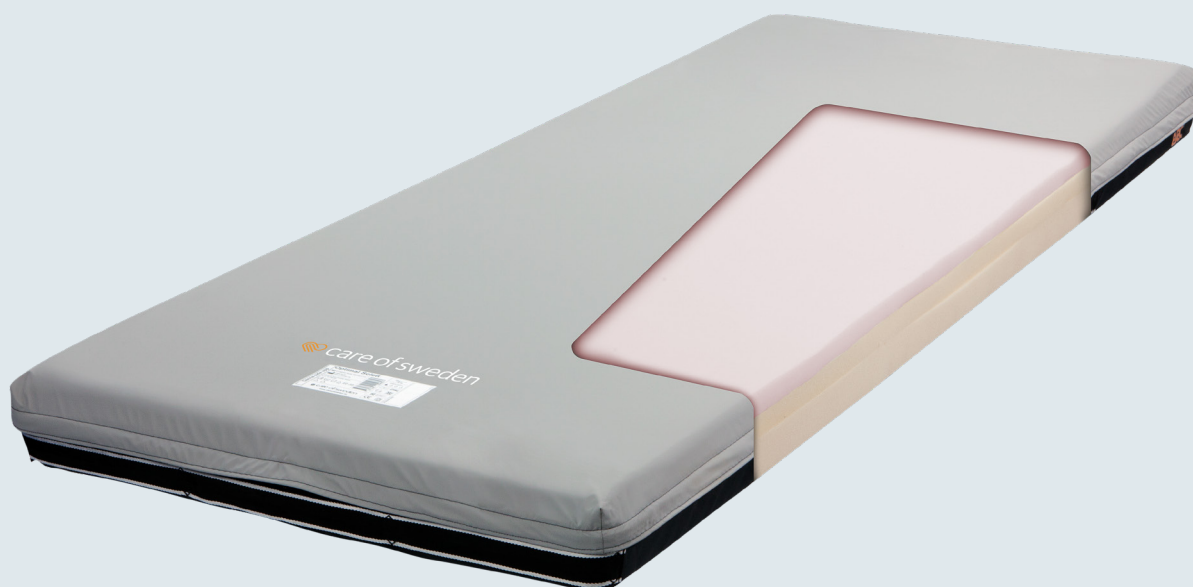

Optimal Solett med överdrag Olivia/Evac

# Optimal Solett

Optimal Solett används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1<sup>(1)</sup>. Det är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass. Optimal Solett är speciellt framtagen för en lägre brukarvikt.

Optimal Solett levereras med hygienöverdrag Evac. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard<sup>(3)(4)</sup>. Överdraget är utrustat med droppskyddad och delbar dragkedja samt funktionshandtag för evakuering.

Optimal Solett tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)(4)</sup>.



## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Evac

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida.

### Olivia

Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

## STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.  
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

## REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2023. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2023-09-22.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p><b>Tryck</b> Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.</p> <p><b>Skjuv</b> Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p><b>Fukt</b> Hygienöverdraget är ångpermeabelt<sup>(2)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p><b>Hygien</b> Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard<sup>(3)(4)</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kärna: kallskum 35 kg/m<sup>3</sup> och trögsaum 50 kg/m<sup>3</sup></li><li>• Höjd: 12 cm</li><li>• Funktion: används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 1<sup>(1)</sup></li><li>• Rekommenderad brukarvikt: upp till 60 kg</li><li>• Brand: EN 597-1, -2</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.</li><li>• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.</li></ul>