


Optimal Solett BM

Extra mjuk och följsam bäddmadrass

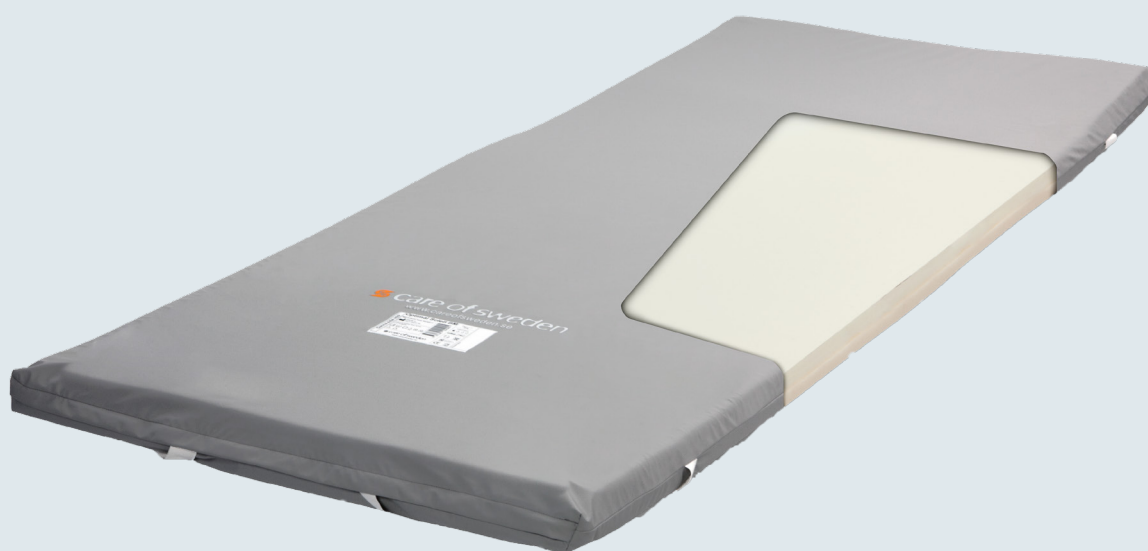

Optimal Solett BM med överdrag Olivia

 care of sweden
SUPPORTING LIFE

Optimal Solett BM

Optimal Solett BM används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 1⁽¹⁾. Madrassen är speciellt framtagen för en lägre brukarvikt. Optimal Solett BM är en bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass.

Optimal Solett BM är en extra mjuk och följsam bäddmadrass som är enkel att rengöra och hantera. Skumkärnan är tillverkad i kallskum med hög densitet vilket ger en lång livslängd och en god komfort.

Madrassen levereras med hygienöverdrag Olivia. Det mjuka och elastiska materialet är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾. Överdraget är utrustat med droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Optimal Solett BM tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

STORLEKAR

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes.
Senast uppdaterad: 2021-05-28.



FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<p>Tryck Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.</p> <p>Skjuv Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.</p> <p>Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration.</p> <p>Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Kärna: kallskum 35 kg/m³ och trögskum 50 kg/m³• Höjd: 6 cm• Överdrag: Olivia• Funktion: används för att förebygga och behandla trycksår upp t.o.m. kategori 1⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 60 kg*• Brand: EN 597-1, -2• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel• Maskintvätt max 95 °C, torktumling <p>*Notera att den underliggande madrassen har påverkan på den totala funktionen, inklusive den rekommenderade brukarvikten</p>