

CuroCell® 4

Effektiv växeltrycksmadrass med god komfort



CuroCell 4 med överdrag Olivia/U-del CC

CuroCell® 4

CuroCell® 4 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾. CuroCell® 4 arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell⁽²⁾ madrass med god komfort och placeras direkt på sängbotten.


CuroCell® 4 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽⁴⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.

En mängd olika tillval kan väljas, bland annat en hälffunktion som avlastar känsliga hälar. CuroCell® 4 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽⁵⁾.



MED TILLBEHÖRSPAKET PRO INKLUDERAS ÄVEN TILLVALEN

- Hälffunktion
- Kabelhållare
- Distanstyg
- Lakanshållare
- Väska

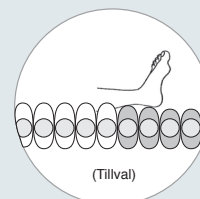

REFERENSER


(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126.

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(5) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Digital pump• Enkel skötsel• Handtag för transport och förflyttning• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽⁴⁾• Goda rengöringsegenskaper• Omvårdnadsläge med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Utbytbara luftceller av polyuretan med Cell-In-Cell-system	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 21 cm• Används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till kategori 4⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 200 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Distanstyg - för bättre komfort (PRO)• Hälffunktion (PRO)• Kabelhållare (PRO)• Kraftig transportväska (PRO)• Lakanshållare (PRO)• Hygienöverdrag med svetsade sömmar	<p>80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.</p> <p> Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.</p> <p>Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-04-13.</p>