

CuroCell® 4

Effektiv växeltrycksmadrass med god komfort



CuroCell 4 med överdrag Olivia/U-del CC

CuroCell® 4

CuroCell® 4 är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾. CuroCell® 4 arbetar enligt växeltrycksprincipen och finns i flera olika utföranden. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell⁽²⁾ madrass med god komfort och placeras direkt på sängbotten.


CuroCell® 4 levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽³⁾⁽⁴⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽⁵⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.

En mängd olika tillval kan väljas, bland annat en hälffunktion som avlastar känsliga hälar. CuroCell® 4 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.



MED TILLBEHÖRSPAKET PRO INKLUDERAS ÄVEN TILLVALEN

- Hälffunktion
- Kabelhållare
- Distanstyg
- Lakanshållare
- Väska

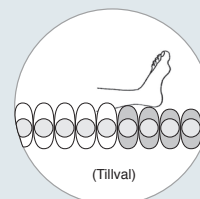

REFERENSER


(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.varhandboken.se/var-d-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(4) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Digital pump• Enkel skötsel• Handtag för transport och förflyttning• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽⁵⁾• Goda rengöringsegenskaper• Omvårdnadsläge med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump• Utbytbara luftceller av polyuretan med Cell-In-Cell-system	<ul style="list-style-type: none">• Typ: Växeltrycksmadrass• Höjd: 21 cm• Används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: Upp till 200 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump: 21 dBA• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Distanstyg - för bättre komfort (PRO)• Hälffunktion (PRO)• Kabelhållare (PRO)• Kraftig transportväska (PRO)• Lakanshållare (PRO)• Hygienöverdrag med svetsade sömmar	<p>80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.</p> <p> Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.</p> <p>Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-27.</p>