


CuroCell® 4 AD

Komfortabel växeltrycksmadrass

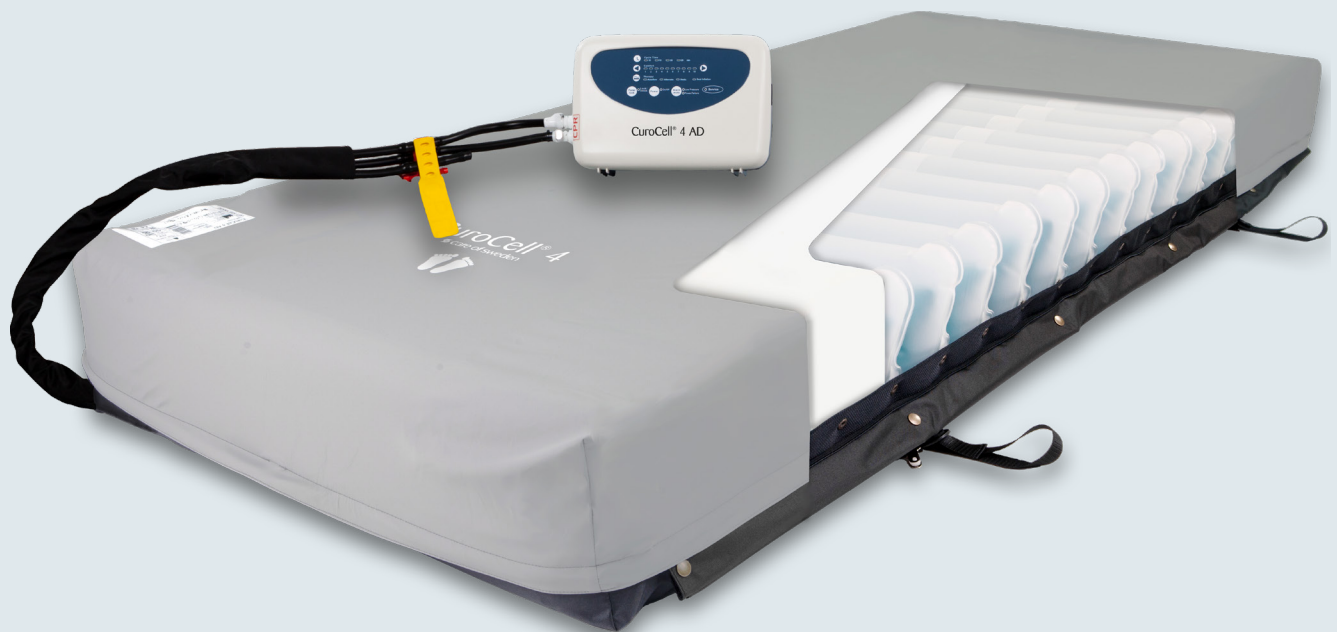

CuroCell® 4 AD med Toppdel Olivia/U-del CC

CuroCell® 4 AD

CuroCell® 4 AD är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4⁽¹⁾. Madrassen används i alla typer av vårdmiljöer och är en funktionell madrass med god komfort och placeras direkt på sängbotten.


Madrassen levereras med ett avtagbart hygienöverdrag med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾. Det mjuka och elastiska överdraget är ångpermeabelt⁽⁴⁾ vilket minskar risken för hudmaceration.

CuroCell® 4 AD tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.



MED TILLBEHÖRSPAKET PRO INKLUDERAS ÄVEN TILLVALEN

- Hålfunktion
- Kabelhållare
- Distanstyg
- Lakanshållare
- Väska

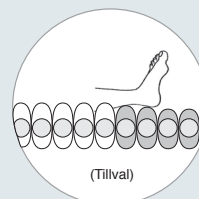

REFERENSER

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019


(2) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(3) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(5) EN ISO 11201 "Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels".

(6) ISO 3746:2010 "Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane".

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">• CPR-funktion – snabbtömning av luft vid HLR• Digital pump• Enkel skötsel och hantering• Handtag för transport och förflyttning• Ljud- och ljusnotifikationer vid för lågt tryck• Ljud- och ljusnotifikationer vid strömavbrott• Mjukt, elastiskt hygienöverdrag som är ångpermeabelt⁽⁴⁾• Omvårdnadsläge med automatisk återgång• Transportfunktion• Tyst och energisnål pump	<ul style="list-style-type: none">• Typ: växeltrycksmadrass• Höjd: 21 cm• Används som hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till kategori 4⁽¹⁾• Rekommenderad brukarvikt: upp till 200 kg• Strömförsörjning: 230 V/50 Hz• Ljudnivå pump, max: 19 dBA⁽⁵⁾, 34 dBA⁽⁶⁾• Garanti: 2 år• Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
TILLVAL	STORLEKAR
<ul style="list-style-type: none">• Distanstyg - för bättre komfort (CuroCell 4® PRO)• Hålfunktion (CuroCell 4® PRO)• Kabelhållare (CuroCell 4® PRO)• Kraftig transportväska (CuroCell 4® PRO)• Lakanshållare (CuroCell 4® PRO)• Hygienöverdrag med svetsade sömmar	80/85/90/105/120x200 cm och 80/85/90x210 cm. Vid behov av andra storlekar kontakta Care of Sweden.
	 Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används. Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2021-05-27.