

Curera® Contur EX Sittdyna

Komfortabel och populär sittdyna



Curera® Contur EX sittdyna med överdrag standard

Curera® Contur EX Sittdyna

Curera® Contur EX är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölarne samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur EX är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Contur EX är enkel att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2022-03-23.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovsidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstrech. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

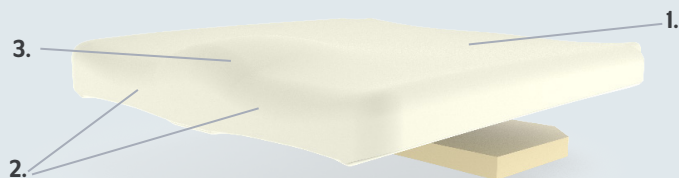

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">Anatomiskt formgjutenEnkel att rengöra	<ul style="list-style-type: none">Höjd: 5 cmGaranti: 2 årMaterial i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skumMaterial i överdrag: Polyester och PolyuretanKlassificering: ISO-kod 18 10 06 - TryckfördelandeBrand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2Tillbehör: Utjämningsplatta

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Djup cm	Bredd cm						
	35	37	40	42	45	47	50
35	70		100				
40	70	100	125	125	135	135	150
45	70	100	125	125	135	150	150
50		100	125	125	135		150