


Curera[®] Contur Sittdyna

Komfortabel och populär sittdyna

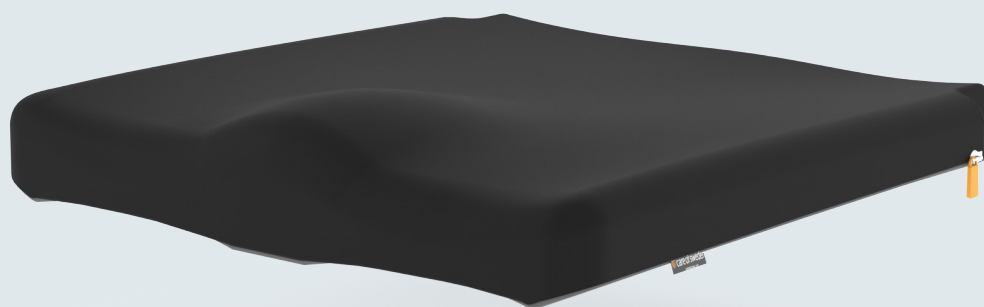

Curera[®] Contur sittdyna med överdrag Onyx

Curera® Contur Sittdyna

Curera® Contur är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölarne samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2019-12-20.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovsidan som motverkar antiglidning. Uldersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Onyx

Följsamt, elastiskt, samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstreich på ovsidan som motverkar framåtgidning, samt antiglid undertill. Kommer med handtag på undersidan.

Överdrag Onyx+

Följsamt, elastiskt samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstreich på ovsidan och antiglid undertill som motverkar framåtgidning. Ett mellanlager av mesh för ett bättre mikroklimat och en generellt högre komfort. Kommer med handtag på undersidan.

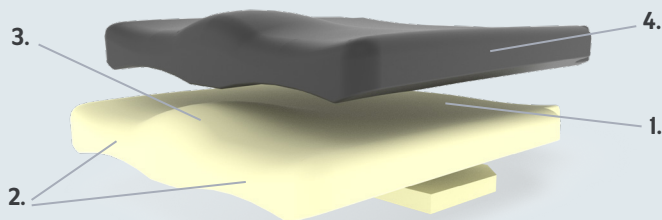

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

4. VÄTSKERÄTT YTSKIKT

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"> Anatomiskt formgjuten Enkel att rengöra 	<ul style="list-style-type: none"> Höjd: 5 cm Garanti: 2 år Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi Material i överdrag: Polyester och Polyuretan Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16 Tillbehör: Utjämningsplatta

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm											
Djup cm	30	33	35	38	40	42	45	47	50	52	
30	70	70									
35	70	70	70		100						
40	70	70	70	100	125	125	125	125	150	150	
42					125	125	125	125	150		
45			70	100	125	125	125	150	150	150	
47					125	125	125				
50				100	125	125	125		150	150	
55									150		