

Curera[®] Contur Sittdyna

Komfortabel och populär sittdyna



Curera[®] Contur sittdyna med överdrag Standard

Curera® Contur Sittdyna

Curera® Contur är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknömlarna samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.




TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovansidan som motverkar antiglidning. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag

Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersida i antiglid.

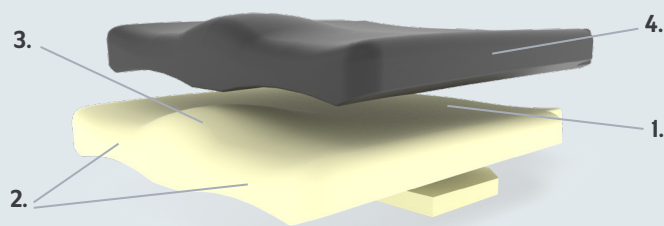

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

4. VÄTSKERÄTT YTSKIKT



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-03-25.

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">Anatomiskt formgjutenEnkel att rengöra	<ul style="list-style-type: none">Höjd: 5 cmGaranti: 2 årMaterial i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummiMaterial i överdrag: Polyester och PolyuretanKlassificering: ISO-kod 18 10 06 - TryckfördelandeBrand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16Tillbehör: Utjämningsplatta

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	Bredd cm									
Djup cm	30	33	35	38	40	42	45	47	50	52
30	70	70								
35	70	70	70		100					
40	70	70	70	100	125	125	135	135	150	150
42					125	125	135	135	150	
45			70	100	125	125	135	150	150	150
47					125	125	135			
50				100	125	125	135		150	150
55									150	