

# Curera<sup>®</sup> Contur Sittdyna

Komfortabel sittdyna



Curera<sup>®</sup> Contur sittdyna med överdrag standard

# Curera® Contur Sittdyna

Curera® Contur är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölarne samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med god friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2021-06-03.

## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Överdrag Standard

Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

### Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

### Överdrag Onyx

Följsamt, elastiskt, samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstreck på ovansidan som motverkar framåtgångning, samt antiglid undertill. Kommer med handtag på undersidan.

### Överdrag Onyx+

Följsamt, elastiskt samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstreck på ovansidan och antiglid undertill som motverkar framåtgångning. Ett mellanlager av mesh för ett bättre mikroklimat och en generellt högre komfort. Kommer med handtag på undersidan.

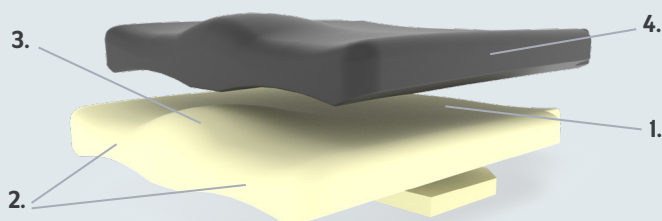

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

4. VÄTSKERÄTT YTSKIKT

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>Anatomiskt formgjuten</li><li>Enkel att rengöra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Höjd: 5 cm</li><li>Garanti: 2 år</li><li>Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi</li><li>Material i överdrag: Polyester och Polyuretan</li><li>Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande</li><li>Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16</li><li>Tillbehör: Utjämningsplatta</li></ul>

## PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	Bredd cm									
Djup cm	30	33	35	38	40	42	45	47	50	52
30	70	70								
35	70	70	70		100					
40	70	70	70	100	125	125	125	125	150	150
42					125	125	125	125	150	
45			70	100	125	125	125	150	150	150
47					125	125	125			
50				100	125	125	125		150	150
55									150	