

Curera[®] Hemi Sittdyna

Sittdyna med specialdesign



Curera[®] Hemi med överdrag standard

Curera® Hemi Sittdyna

Curera® Hemi är en tryckfördelande speciellt utformad dyna med mönsterskyddad design⁽¹⁾ och som passar för personer som har behov av att kunna sparka sig fram med rullstolen. Den är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. För bättre rörlighet är dynan fasad i framkant och främre halvan nersänkt på en eller båda sidorna. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop ger dynan en stabil sits för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Hemi är hög och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Hemi går att få i tre varianter, nedsänkt på höger respektive vänster sida eller på båda sidor.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-12-20.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovasidan som motverkar antiglidning. Uldersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstrech. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

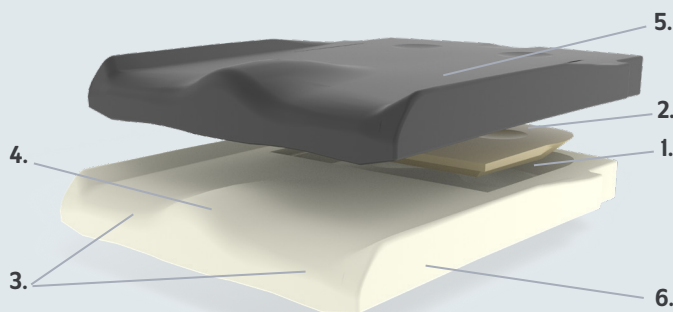

1. SITTGROP

2. URTAG FÖR SVANSKOTA

3. URTAG FÖR BEN

4. BENDELARE

5. VÄTESKETÄTT YTSKIKT

6. SIDOSTÖD

(1) Mönsterskydd nr 79436.

EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Främre halvan av dynan sänkt på en eller två sidor
- Enkel att rengöra

FAKTA

- Höjd: 5 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
- Material i överdrag: Polyester och Polyuretan
- Klassificering: ISO-kod I8 10 06 - Tryckfördelande
- Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm							
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	70		70	115			
40	70	70	115	130	130	130	150
45		70	115	130	130	130	150
50				130	130		150