


Curera[®] Plantur Sittdyna

Sittdyna med plan ovansida

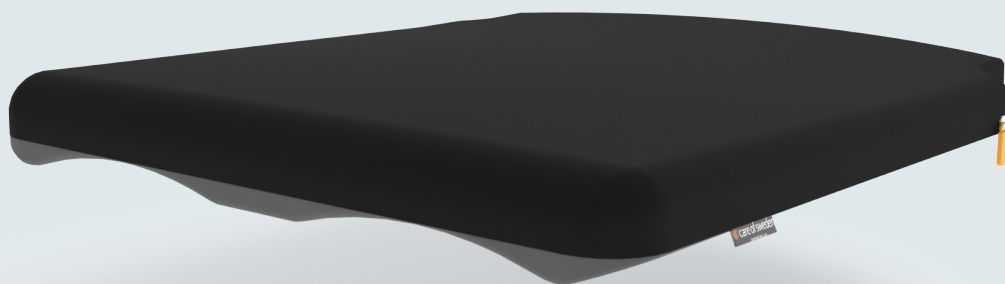

Curera[®] Plantur med överdrag Onyx

Curera® Plantur Sittdyna

Curera® Plantur är en tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av formgjuten polyuretanskum med plan ovansida och med inlägg av viskoelastiskt skum i undersidan.

Sittgrop och urtag för benen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölarerna samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Komforten hos Curera® Plantur passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Plantur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2019-12-11.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovansidan som motverkar antiglidning. Uldersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Onyx

Följsamt, elastiskt, samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstreich på ovansidan som motverkar framåtgidning, samt antiglid undertill. Handtag på undersidan.

Överdrag Onyx+

Följsamt, elastiskt samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstreich på ovansidan och antiglid undertill som motverkar framåtgidning. Mellanlager av mesh för ett bättre mikroklimat och en generellt högre komfort. Handtag på undersidan.

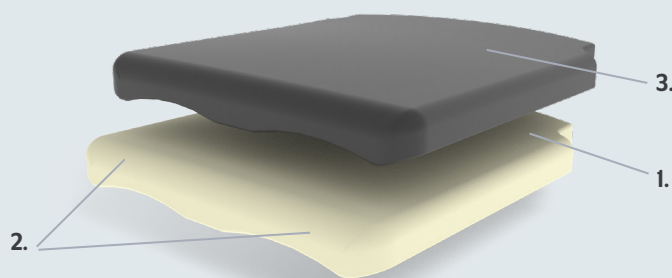

1. SITTGROP
2. URTAG FÖR BEN
3. VÄTSKETÄTT YTSKIKT

| EGENSKAPER | FAKTA |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Enkel att rengöra• Plan yta | <ul style="list-style-type: none">• Höjd: 5 cm• Garanti: 2 år• Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi• Material i överdrag: Polyester och Polyuretan• Klassificering: ISO-kod I8 10 06 - Tryckfördelande• Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16 |

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

| Bredd cm | | | | | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Djup cm | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
| 35 | 70 | | 125 | | | | |
| 40 | 70 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 42 | | | 125 | 125 | | | |
| 45 | 70 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| 50 | | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |