

Curera[®] Tremix Sittdyna

Komfortabel trycksårsförebyggande sittdyna



Curera[®] Tremix med överdrag standard

Curera® Tremix sittdyna

Curera® Tremix är anatomiskt uppbyggd och används som trycksårspåbyggande. Dynans uppbyggnad och anatomiskt anpassade form med urtag för svanskota, bendelare och lateralstöd gör att den formar sig efter användaren. Den fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter.

Med urtag för ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Tremix är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. För extra god sittfunktion är den utrustad med förstärkt bottenplatta.

Curera® Tremix har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med god friktion. Samtliga Curera® sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-06-03.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovsidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstreich. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

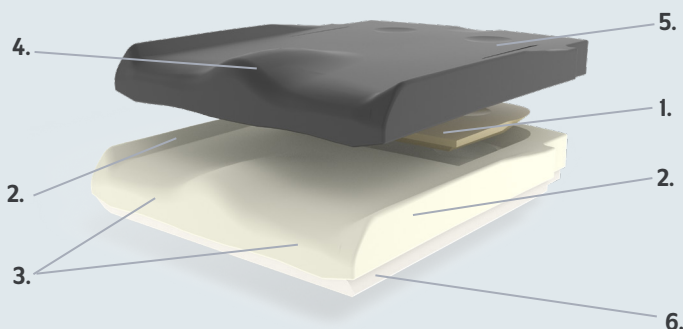

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. SITTGROP | 4. BENDELARE |
| 2. LATERALSTÖD | 5. VÄTSKETÄTT YTSKIKT |
| 3. URTAG FÖR BEN | 6. FÖRSTÄRKT BOTTENPLATTA |

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"> Anatomiskt uppbyggd Formar sig efter brukaren Trycksårspåbyggande Enkel att rengöra 	<ul style="list-style-type: none"> Höjd: 7 cm Garanti: 2 år Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi, cellpolyeten Material i överdrag: Polyester och Polyuretan Klassificering: ISO-kod 04 33 03 - Tryckavlastande Brand: Uppfyller ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	35	37	40	42	45	47	50	52	55
35	70								
40	70	105	115	130	130	130	150	150	160
45		105	115	130	130	150	150	150	160
50			115	130	130	150	150	150	160