

# Curera<sup>®</sup> Consil kupad Sittdyna

Tryckfördelande sittdyna



Curera<sup>®</sup> Consil Kupad med överdrag standard

# Curera® Consil kupad Sittdyna

Curera® Consil kupad är en anatomiskt formad sittdyna med mönsterskyddad design. Den är tryckfördelande och ger användaren god komfort och sittposition. Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger god avlastning för sittbensknölna samt minskar risken för skjuvkrafter. Sidostöd, bendelare och sittgrop ger en stabil sittposition för personer som behöver extra stöd.

Den har urtag för ryggör samt rundad bakkant som ger den en bra passform i rullstolen. Curera® Consil kupad passar personer som sitter kortare tid.

Samtliga Curera® sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Överdrag Standard

Följsamt material på ovsidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

### Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

### Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstrech. Tyget har god följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

### Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

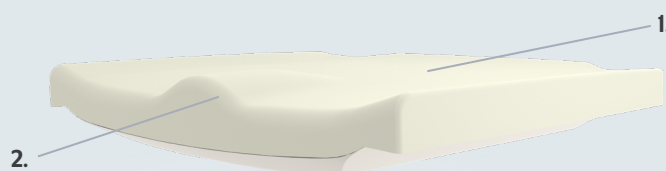

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2019-12-20.

1. SITTGROP

2. BENDELARE

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>Anatomiskt formgjuten</li><li>Undersida i antiglidmaterial (Överdrag Hätta)</li><li>Enkel att rengöra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Höjd: 7 cm</li><li>Garanti: 2 år</li><li>Material i dyna: Polyuretanskum</li><li>Material i överdrag: Polyester och Polyuretan</li><li>Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande</li><li>Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16</li></ul>

## PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm							
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	60						
40	60	90	90	125	125	125	150
45		90	90	125	125	150	150
50					125	150	150