


# CuroCell® A4 CX15

Ett helautomatiskt och flexibelt växeltryckssystem  
med hög komfort och funktionalitet

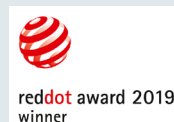

CuroCell A4® CX15 med Toppdel Stone/U-del CC

# CuroCell® A4 CX15

CuroCell® A4 CX15 används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 4<sup>(1)</sup> samt oklassificerade trycksår. Systemet är utvecklat för att minska påverkan av skjuvkrafter och ge ett förbättrat mikroklimat.

CuroCell® A4 CX15 har en intelligent kontrollenhet med ett användarvänligt gränssnitt. Kontrollenheten är helautomatisk och behöver inte justeras manuellt. Systemet identifierar användaren och hanterar automatiskt alla inställningar för att optimera trycket utifrån användarens behov.

Samtliga madrasser levereras med hygienöverdrag som är elastiskt i alla riktningar och uppfyller vårdens krav på hygien<sup>(3)</sup>, kvalitet och säkerhet. Alla överdrag är ångpermeabla<sup>(4)</sup>, vilket minskar risken för hudmaceration. De är tillverkade av moderna och återvinningsbara material.



## TILLVAL

- Slitstark väska
- Lakanshållare

## STORLEKAR

80/85/90/100/105/120x200/210 x 15 cm

## REFERENSER

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels", SP 2018.

(3) ISO 16603 "resistance of penetration by blood and body fluids", ISO 16604 "resistance of penetration by blood-borne pathogens", EN 14126, "performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents".

(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2020. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2020-02-19.

### MADRASSENS FUNKTIONER

- Utbytbara celler med säkerhetsmadrass
- Hälfunktion
- Multifunktionellt inneröverdrag
- Unik CPR-funktion med transportfunktion
- Smart kabelhantering
- Unik design för enkel hantering och användning
- Dragkedja med droppskydd
- Statiska huvudceller

### KONTROLLENHETENS FUNKTIONER

- Helautomatisk kontrollenhet som anpassas individuellt till brukaren
- Användarvänligt gränssnitt
- Ljud- och ljusnotifikationer
- Tre programlägen: Pulserande, alternerande och konstant lågt tryck
- Omvårdnadsläge
- Pack & Go® - funktion
- Tyst drift och vibrationsfri
- Låg spänning (12V strömförsörjning)
- Mjuka upphängningsändar med extra mjuk spets
- Air Flow Control™; Konstant temperatur, ökad användarkomfort, minskad energiförbrukning

### FAKTA

- **Typ: Växeltrycksmadrass**
- **Höjd: 15 cm**
- **Rekommenderad brukarvikt: 0–200 kg**
- **Strömförsörjning: 100-240 V / 50-60 Hz**
- **Ljudnivå kontrollenhet, max: 17 dBA<sup>(2)</sup>**
- **Garanti: 2 år**
- **PVC-fri**
- **Maskintvätt i max 95 °C, torktumling**
- **Rengöring av överdrag: Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel**
- **Klor-resistent (1%) multistretchöverdrag (överdrag Stone med svetsade sömmar, 10%)**



Skanna QR-koden för att se presentationsvideo.



### VÄLJ DIN MADRASS

– Besök vår webbplats för riktlinjer när du väljer en madrass.

[www.careofsweden.com/mattress-selector](http://www.careofsweden.com/mattress-selector)