

# Curera® Concept Sittdyna

Komfortabel sittdyna



Curera® Concept med överdrag standard

 care of sweden

SUPPORTING LIFE

# Curera® Consept Sittdyna

Curera® Consept är en bekväm och tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovsidan. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop ger den ett stabilt sittande för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Komforten hos Curera® Consept är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. Curera® Consept kan användas i både rullstolar med plansits och hängmattesits.

Curera® Consept har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inga bromerade flamskyddsmedel eller latex.


## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Överdrag Standard

Följsamt material på ovsidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

### Hygienöverdrag

Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

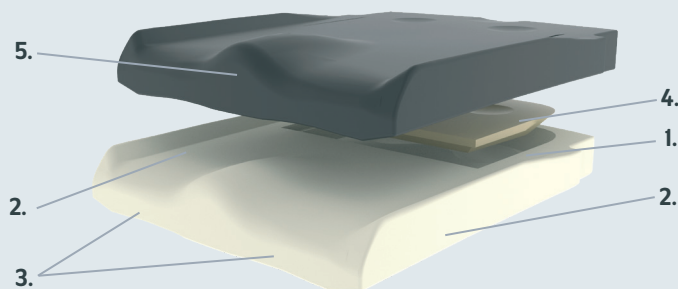

1. SITTGROP
2. LATERALSTÖD
3. URTAG FÖR BEN

4. URTAG FÖR SVANSKOTA
5. BENDELARE



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2025. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2025-03-27.

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Anatomiskt formgjuten</li><li>• Enkel att rengöra</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Höjd: 5 cm</li><li>• Garanti: 2 år</li><li>• Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi</li><li>• Material i överdrag: Polyester/polyuretan</li><li>• Klassificering: ISO-kod 122506-03 - Tryckfördelande</li><li>• Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16</li></ul>

## PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standardstorlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	Bredd cm						
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	70	70	105				
40	70	105	115	135	135	135	150
42			115	135	135	135	150
45	70	105	115	135	135	150	150
50	70	105	115	135	135	150	150
55							150

### OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

