

# Curera® Consept Sittdyna

## Komfortabel sittdyna

Curera® Consept är en bekväm och tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop ger den ett stabilt sittande för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Komforten hos Curera® Consept är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. Curera® Consept kan användas i både rullstolar med plansits och hängmattesits.



Curera® Consept Sittdyna med standardöverdrag



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Curera® Consept har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch som förhindrar framåtgång och som underlättar förflyttning bakåt och åt sidan. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inga bromerade flamskyddsmedel eller latex.


## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Standardöverdrag

Följsamt material på ovasidan som förhindrar framåtgång och som underlättar förflyttning bakåt och åt sidan. Undersida i antiglid.

### Hygienöverdrag

Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

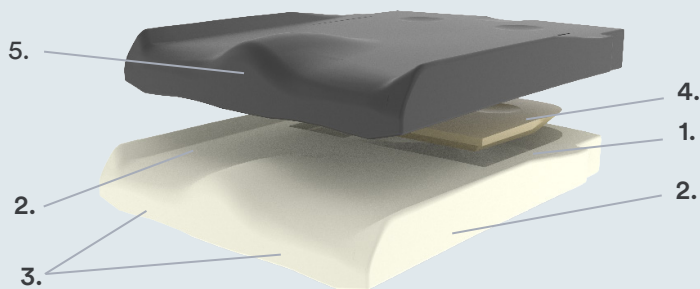

1. SITTGROP
2. LATERALSTÖD
3. URTAG FÖR BEN
4. URTAG FÖR SVANSKOTA
5. BENDELARE



Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-04-13.

### EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Enkel att rengöra

### FAKTA

- Höjd: 5 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
- Material i överdrag: Polyester/polyuretan
- Klassificering: ISO-kod 122506-03 - Tryckfördelande
- Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

## PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standardstorlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

| Bredd cm |    |     |     |     |     |     |     |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Djup cm  | 35 | 37  | 40  | 42  | 45  | 47  | 50  |
| 35       | 70 | 70  | 105 |     |     |     |     |
| 40       | 70 | 105 | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 |
| 42       |    |     | 115 | 135 | 135 | 135 | 150 |
| 45       | 70 | 105 | 115 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| 50       | 70 | 105 | 115 | 135 | 135 | 150 | 150 |
| 55       |    |     |     |     |     |     | 150 |

### OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

