

# Curera<sup>®</sup> Contur Barn Sittdyna

Sittdyna för barn



Curera<sup>®</sup> Contur Barn sittdyna med överdrag standard

# Curera® Contur Barn Sittdyna

Curera® Contur Barn är en bekväm och tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger god avlastning för sittbensknölar samt minskad risk för skjuvkrafter.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Komforten hos Curera® Contur Barn passar mindre personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Contur Barn har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inga bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2021-06-03.

## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Överdrag Standard

Följsamt material på ovasidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

### Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

### Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstreich. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

### Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

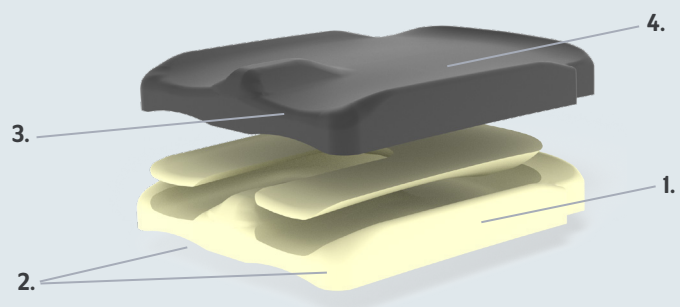

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

4. VÄTSKERÄTT YTSKIKT

## EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Enkel att rengöra

## FAKTA

- Höjd: 4 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
- Material i överdrag: Polyester och Polyuretan
- Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande
- Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16
- Tillbehör: Utjämningsplatta

## PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm						
Djup cm	25	27	30	32	33	35
25	40	40	60	60		60
27	40	40				
30	40	60	60		60	60
32						60
35	40		60	60	60	60
40			60		60	60