

Curera® Contur Sittdyna

Komfortabel sittdyna



Curera® Contur sittdyna med överdrag standard

Curera® Contur Sittdyna

Curera® Contur är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgroppen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölarerna samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. Curera® Contur kan användas i både rullstolar med plansits och hängmattesits.

Curera® Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med god friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2023. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2023-01-10.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Överdrag Standard

Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Onyx

Följsamt, elastiskt, samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstrech på ovansidan som motverkar framåtgående, samt antiglid undertill. Kommer med handtag på undersidan.

Överdrag Onyx+

Följsamt, elastiskt samt avtagbart överdrag tillverkat i 4-vägsstrech på ovansidan och antiglid undertill som motverkar framåtgående. Ett mellanlager av mesh för ett bättre mikroklimat och en generellt högre komfort. Kommer med handtag på undersidan.

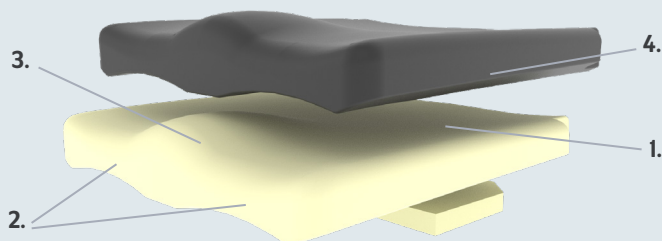

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

4. VÄTSKERÄTT YTSKIKT

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none">Anatomiskt formgjutenEnkel att rengöra	<ul style="list-style-type: none">Höjd: 5 cmGaranti: 2 årMaterial i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummiMaterial i överdrag: Polyester och PolyuretanKlassificering: ISO-kod 18 10 06 - TryckfördelandeBrand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16Tillbehör: Utjämningsplatta

PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm											
Djup cm	30	33	35	38	40	42	45	47	50	52	
30	125	125									
35	125	125	125		125						
40	125	125	125	125	125	125	135	135	150	150	
42					125	125	135	135	150		
45			125	125	125	125	135	150	150	150	
47					125	125	135				
50				125	125	125	135		150	150	
55									150		