

Curera® Contur Sittdyna

Komfortabel sittdyna

Curera® Contur är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölar samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. Curera® Contur kan användas i både rullstolar med plansits och hängmattesits.

Curera® Contur Sittdyna med standardöverdrag



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Curera® Contur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med god friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.


TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag

Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag

Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

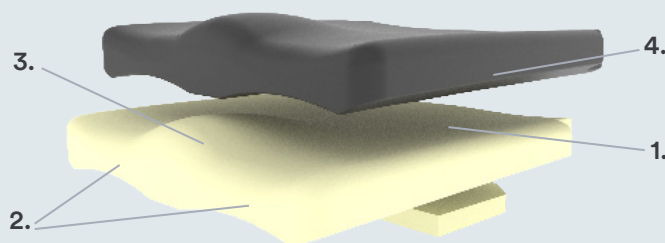

1. SITTGROP (VISCO)

2. URTAG FÖR BEN

3. BENDELARE

4. VÄTSKETÄTT YTSKIKT



Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2026-04-13.

EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Enkel att rengöra

FAKTA

- Höjd: 5 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi
- Material i överdrag: Polyester och Polyuretan
- Klassificering: ISO-kod 122506-03 - Tryckfördelande
- Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16
- Tillbehör: Utjämningsplatta

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standardstorlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	Bredd cm									
Djup cm	30	33	35	38	40	42	45	47	50	52
30	125	125								
35	125	125	125		125					
40	125	125	125	125	125	125	135	135	150	150
42					125	125	135	135	150	
45			125	125	125	125	135	150	150	150
47					125	125	135			
50				125	125	125	135		150	150
55									150	

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

