

# CuroCell® AREA Zone

Funktionell & självinställande ersättningsmadrass

CuroCell® AREA Zone är ett hjälpmedel som används för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3<sup>(1)</sup>. Madrassen kombinerar skummets goda komfort med luftens tryckutjämnande egenskaper. Madrassen innehåller nio luftceller som är uppdelade i zoner och som anpassar sig till individen och ger en individuell inställning. Madrassen är självinställande och det behövs ingen elektrisk pump.

CuroCell® AREA Zone kan användas i alla typer av vårdmiljöer och är enkel att hantera och sköta. Madrassen har goda egenskaper när det gäller påverkan av tryck, skjuv och fukt<sup>(2)(3)</sup>, tre viktiga områden vid förebyggande och/eller behandling av trycksår.

Madrassen är uppbyggd i flera lager med höglastiskt kallskum av god kvalitet. Den inbyggda hälfunktionen reducerar även trycket mot hälarna. Madrassen har en god hygienisk standard<sup>(4)(5)</sup> och tillverkas med svetsade sömmar.

## Överdrag för komfort och hygien

Madrassen är utrustad med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring. Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch<sup>(7)(6)</sup> för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt<sup>(3)</sup> för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

Tillgängliga överdrag:



### Steel

- Sömmar: svetsade
- Färg: blå
- Material: 44 % polyamid, 56 % polyuretan coating



### Stone

- Sömmar: svetsade
- Färg: grå
- Material: 61 % polyamid, 39 % polyuretan coating
- Klortåligt (10%)




### Underdel Evac

- Kan kombineras med toppdel Stone och Steel
- Färg: svart
- Material: 100 % polyester polyuretan
- Evakueringshandtag



### Underdel Duro

- Kan kombineras med toppdel Stone och Steel
- Färg: svart
- Material: 44 % polyamid, 56 % polyuretan coating

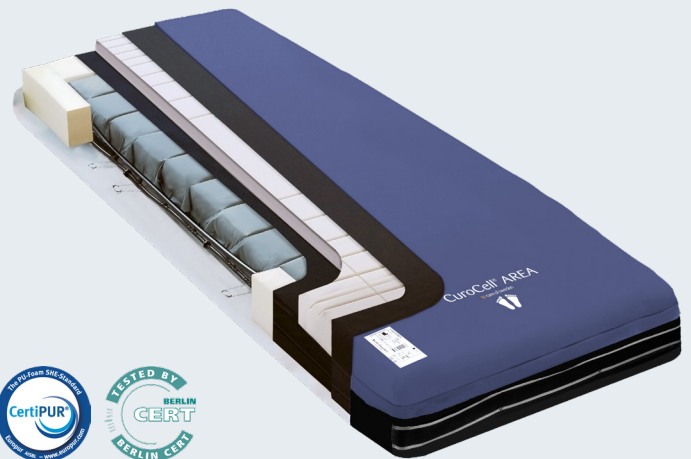

Teknisk specifikation	
Höjd	18 cm
Trycksårskategori	Upp till och med kategori III <sup>(6)</sup>
Rekommenderad brukarvikt	Upp till och med 230 kg
Storlekar	80/85/90/105/120 x 200/210 cm
Material skumkärna	Kallskum
Brand	EN 597-1, -2
Rengöring av överdrag	Torka av med rengöringsmedel och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt i max 95 °C, torktumling
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745
Tillval	Transportväska

## Referenser

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) Examination of the pressure relief capability, Berlincert 2012.

(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(5) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.

(6) SS-EN ISO 15496:2004.

(7) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-19.