

# Optimal 5zon<sup>®</sup> BM

Trycksår orsakar stort lidande för den som drabbas samt stora kostnader för samhället. En stor andel av de trycksår som uppkommer kan förebyggas<sup>(4)</sup>.

För att en madrass ska ha förebyggande effekt krävs balans mellan att individen sjunker ned och trycket fördelas jämnt över ytan, samtidigt som skummet ger tillräckligt stöd för att undvika att bottna igenom.

## Kubskuren bäddmadrass för jämn tryckfördelning

Med ett högkvalitativt skum i kombination med en kubskuren bäddmadrass, är Optimal 5zon<sup>®</sup> BM utvecklad för att främja komfort och tryckfördelning.

Bäddmadrassen är konstruerad i zoner av varierande storlek, anpassade för hur mycket tryck som krävs för kroppens olika delar att sjunka ned i madrassen. För lättare kroppsdelar, såsom hämlarna, har madrassen kuber av mindre storlek för att främja en god och jämn tryckfördelning över hela kroppen.

## Skumkvaliteten påverkar patientsäkerheten

Skum av hög kvalitet är av yttersta vikt för att säkerställa patientsäkerhet och lång livslängd hos madrassen. Optimal 5zon<sup>®</sup> BM består av skum med hög densitet (kg/m<sup>3</sup>), vilket ökar dess förmåga att bära upp individen utan risk för att bottna, samtidigt som det ger hög motståndskraft mot utmattning och förutsättningar för en lång livslängd. Det resulterar i en hållbar madrass som behöver bytas ut mer sällan, vilket resulterat i lägre kostnader över tid.


## Överdrag för hygien och minskad skjuv

Madrassen är utrustad med ett avtagbart och vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring. Hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt<sup>(2)</sup> för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

Tillgängliga överdrag:

### Olivia

- Sydda sömmar
- Färg: ljus grå
- Material: 55% polyester, 45% polyuretan coating

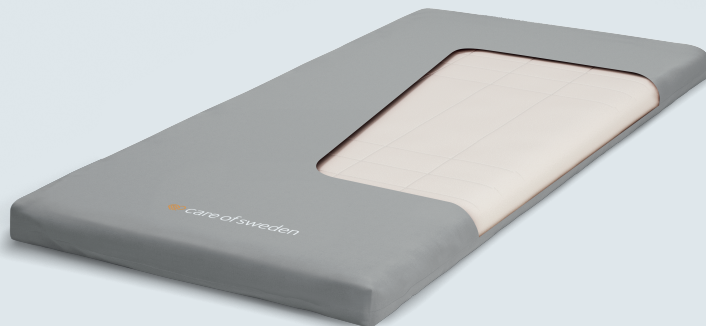

## Teknisk specifikation

Trycksårskategori	Upp till och med kategori II <sup>(1)</sup>
Rekommenderad brukarvikt	Upp till 150 kg
Typ av madrass	Bäddmadrass
Höjd	6 cm
Material skumkärna	Bäddmadrass: Kallskum, 65 kg/m <sup>3</sup> + 90 N
Storlekar	80/85/90×200/205/210 cm och 105/120×200 cm
Brand	EN 597-1, -2
Instruktioner för rengöring	Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745
Egenskaper	Strumpad skumkärna, kubskuren, hygienöverdrag



## Referenser

(1) National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline: Fourth Edition. Emily Haesler (Ed.). 2025. (2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1. (3) Patentnummer 008522741. (4) Socialstyrelsen. (2018). Bilaga 2: Vårdkostnader för undvikbara trycksår – Ett räkneexempel.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB.  
© Care of Sweden AB, 2025. All rights reserved. Last update: 2025-11-14.