

Optimal Care

Ersättningsmadrass med god komfort & support

Optimal Care används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 3⁽¹⁾. Optimal Care är indelad i zoner som är anpassade efter kroppen i syfte att skapa en god tryckfördelning. Madrassen är utrustad med förstärkta sidor för extra stöd vid i- och urstigning ur säng.

Optimal Care tillverkas med moderna och hållbara material, och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽³⁾⁽⁴⁾.

Optimal Care finns också i varianten Optimal Care Duo, med ett modulsystem på båda sidor som gör den vändbar.

Överdrag för komfort och hygien

Madrassen är utrustad med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch⁽⁵⁾⁽³⁾ för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt⁽²⁾ för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

Tillgängliga överdrag:



Olivia

- Sydda sömmar
- Färg: ljusgrå
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating



Olivia H

- Sydda sömmar
- Färg: ljusgrå
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
- Handtag på ena långsidan för förflyttning av madrass




Bottom part Evac

- Kombineras med toppdel Olivia
- Färg: svart
- Material: 100 % polyester polyuretan
- Evakueringshandtag



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. All rights reserved. Last update: 2026-01-20.

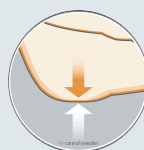


Tryck

Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.



Skjuv

Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.

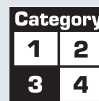

Teknisk specifikation	
Material skumkärna	Högelastiskt kallskum 50 kg/m ³
Höjd	14 cm
Trycksårskategori	Upp till och med kategori III ⁽⁹⁾
Rekommenderad brukarvikt	Upp till och med 160 kg
Storlekar	80/85/90 x 200/205/210 cm och 105/120 x 200/210 cm.
Brand	EN 597-1, -2
Instruktion för rengöring	Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

Referenser

(1) National Pressure Injury Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline: Fourth Edition. Emily Haesler (Ed.). 2025.

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(5) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.