

# Optimal Cura

Förebyggande ersättningsmadrass med god tryckutjämning

Optimal Cura används som ett hjälpmedel för att förebygga och behandla trycksår upp till och med kategori 2<sup>(1)</sup>. Det är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal Cura är en tvåskiktssmadrass där det övre skiktet består av viskoelastiskt skum (så kallat trögsaum) och det undre skiktet består av kallsaum. Madrassens speciella vågformade konstruktion och material ger goda tryckutjämnande egenskaper. De två skikten tillåter kroppen att sjunka ner i materialet så att trycket fördelas på en större yta.

Optimal Cura tillverkas med moderna och hållbara material, och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet<sup>(3)(4)</sup>.

## Överdrag för komfort och hygien

Madrassen är utrustad med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch<sup>(5)(3)</sup> för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt<sup>(2)</sup> för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

Tillgängliga överdrag:



### Olivia

- Sydda sömmar
- Färg: ljusgrå
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating



### Olivia H

- Sydda sömmar
- Färg: ljusgrå
- Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
- Handtag på ena långsidan för förflyttning av madrass



### Olivia Evac

- Kombinerat med toppdel Olivia
- Färg: svart
- Material: 100 % polyester polyuretan
- Evakueringshandtag



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and CuroCell are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2024. All rights reserved. Last update: 2024-01-19.




### Tryck

Det elastiska materialet och madrassens zon- och modulsystem ger en god tryckutjämning.



### Skjuv

Madrassen är konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter.

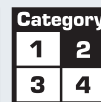

Teknisk specifikation	
Material skumkärna	Högelastiskt kallsaum 50 kg/m <sup>3</sup>
Höjd	13 cm
Trycksårskategori	Upp till och med kategori II <sup>(6)</sup>
Rekommenderad brukarvikt	Upp till och med 130 kg
Storlekar	80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm
Brand	EN 597-1, -2
Instruktion för rengöring	Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

## Referenser

(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline. Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019

(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.

(4) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

(5) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.