

# Curera<sup>®</sup> Consept Latus Sittdyna

Tryckfördelande sittdyna anpassad  
för tyngre brukare



Consept Latus med överdrag standard

# Curera® Consept Latus Sittdyna

Curera® Consept Latus är en bekväm och tryckfördelande sittdyna avsedd för tunga brukare, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Utrustad med förstärkt bottenplatta, sidostöd, bendelare och sittgrop ger den en stabil sits för tunga personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggrör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Det är en komfortabel sittdyna och passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Consept Latus har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Eftertryck förbjöds. Senast uppdaterad: 2022-03-23.

## TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

### Överdrag Standard

Följsamt material på ovasidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

### Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

### Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstreich. Tyget är följsamt och har en god friktionsförmåga. Resår runt om.

### Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

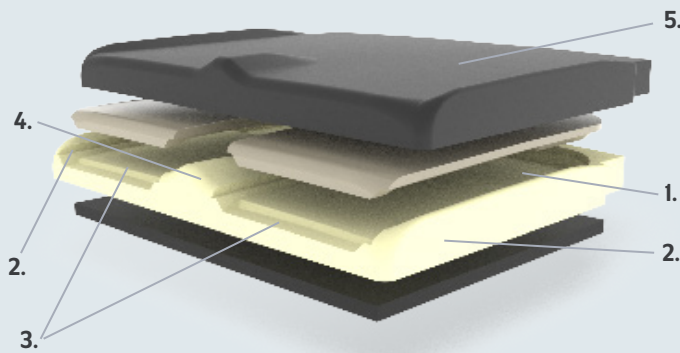

1. SITTGROP

2. LATERALSTÖD

3. URTAG FÖR BEN

4. BENDELARE

5. VÄTSKETÄTT YTSKIKT

EGENSKAPER	FAKTA
<ul style="list-style-type: none"><li>Anatomiskt formgjuten</li><li>Enkel att rengöra</li><li>Bottenplatta av vulkaniserat gummi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Höjd: 7 cm</li><li>Garanti: 2 år</li><li>Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi</li><li>Material i överdrag: Polyester och Polyuretan</li><li>Klassificering: ISO-kod 18 10 06 - Tryckfördelande</li><li>Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16</li></ul>

## PASSFORMSGUIDE:

(Rekomenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm					
Djup cm	50	52	55	57	60
40		250	250	250	270
42	250				
45	250	250	250		270
47					270
50	250	250	250	270	270
55	250		250	270	270