

Curera® Consept EX Sittdyna

Komfortabel sittdyna

Curera® Consept EX är en bekväm och tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyuretanskum med inlägg av viskoelastiskt skum från ovasidan. Utrustad med sidostöd, bendelare och sittgrop ger den ett stabilt sittande för personer som behöver extra stöd.

Den anatomiska och anpassade formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar och svanskota samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen.

Komforten hos Curera® Consept EX är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid.



Curera® Consept EX med överdrag standard



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag

Följsamt material på ovasidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstrech. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Delux

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

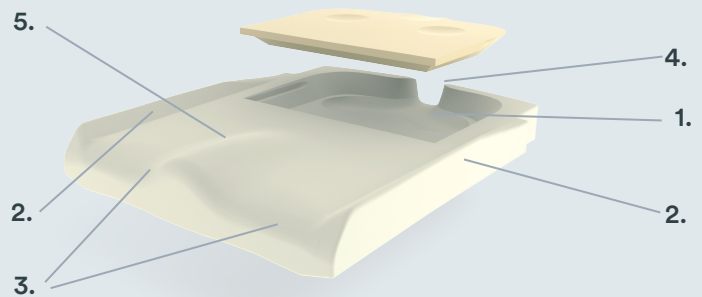

1. SITTGROP
2. LATERALSTÖD (SIDOSTÖD)
3. URTAG FÖR BEN
4. URTAG FÖR SVANSKOTA
5. BENDELARE



Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-01-23.

EGENSKAPER

- Anatomiskt formgjuten
- Enkel att rengöra

FAKTA

- Höjd: 5 cm
- Garanti: 2 år
- Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum
- Material i överdrag: Polyester/polyuretan
- Klassificering: ISO-kod 122506-03 - Tryckfördelande
- Brand: ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	Bredd cm						
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	70						
40	70	105	115	130	130	130	150
42			115	130	130	130	150
45	70	105	115	130	130	150	150
50	70	105	115	130	130	150	150

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

