


Curera® Consil Sittdyna

Tryckfördelande sittdyna

Curera® Consil är en anatomiskt formad sittdyna med mönsterskyddad design⁽¹⁾. Den är tryckfördelande och ger användaren god komfort och sittposition. Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger god avlastning för sittbensknöarna samt minskar risken för skjuvkrafter. Sidostöd, bendelare och sittgrop ger en stabil sittposition för personer som behöver extra stöd.

Den har urtag för ryggrör samt rundad bakkant som ger den en bra passform i rullstolen. Curera® Consil passar personer som sitter kortare tid. Curera® Consil kan användas i både rullstolar med plansits och hängmattesits.

Samtliga Curera® sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.

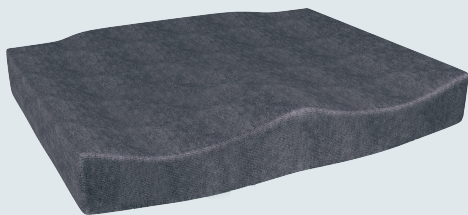

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag


Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag

Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstrech. Tyget har god följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

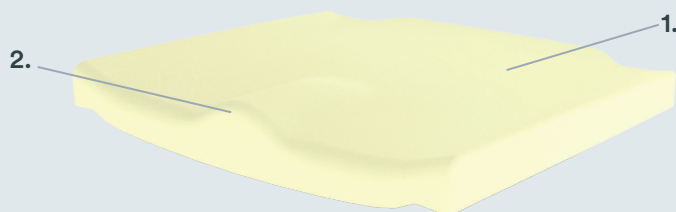

1. SITTGROP

2. BENDELARE

Curera® Consil med standardöverdrag



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

 Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-01-23. (1) Mönsterskydd nr 81423.	EGENSKAPER	FAKTA
	<ul style="list-style-type: none">Anatomiskt formgjutenUndersida i antiglidmaterial (Överdrag Hätta)Enkel att rengöra	<ul style="list-style-type: none">Höjd: 5 cmGaranti: 2 årMaterial i dyna: PolyuretanskumMaterial i överdrag: Polyester och PolyuretanKlassificering: ISO-kod 122506-03 - TryckfördelandeBrand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

	Bredd cm						
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	70						
40	70	90	90	125	135	135	150
45		90	90	125	135	150	150
50					135	150	150

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

