

Curera® Contur EX Sittdyna

Komfortabel och populär sittdyna

Curera® Contur EX är en bekväm och tryckfördelande sittdyna som är uppbyggd av en anatomisk formgjuten bas av polyureatanskum med viskoelastiskt skum i sittgropen.

Den anatomiska formen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra och stabil sittposition, god avlastning för sittbensknölar samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör, rundad bakkant och bendelare ger den även en bra stabilitet och passform i rullstolen. Sittkomforten hos Curera® Contur EX är god och passar personer som sitter både längre och kortare tid. Curera® Contur EX kan användas i både rullstolar med plansits och hängmattesits.

Curera® Contur EX är enkel att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med hög friktion.



Curera® Contur EX sittdyna med överdrag standard

TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag

Följsamt material på ovsidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag


Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

Överdrag Hätta

Tillverkat i 2-vägsstreck. Tyget har hög följsamhet och friktionsförmåga. Resår runt om.

Överdrag Deluxe

Polyesterplysch på utsidan och självventilerande material på insidan. Dragkedja på bakkanten.

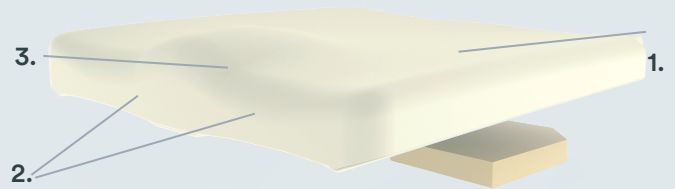

1. SITTGROP (VISCO) 2. URTAG FÖR BEN 3. BENDELARE



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

EGENSKAPER		FAKTA
 	<ul style="list-style-type: none">Anatomiskt formgjutenEnkel att rengöra	<ul style="list-style-type: none">Höjd: 5 cmGaranti: 2 årMaterial i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skumMaterial i överdrag: Polyester och PolyuretanKlassificering: ISO-kod 122506-03 - TryckfördelandeBrand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2Tillbehör: Utjämningsplatta
 		

Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-01-23.

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm							
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	125		125				
40	125	125	125	125	135	135	150
45	125	125	125	125	135	150	150
50		100	125	125	135		150

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

