

Curera® Plantur Sittdyna

Sittdyna med plan ovansida

Curera® Plantur är en tryckfördelande sittdyna, uppbyggd av formgjuten polyuretanskum med plan ovansida och med inlägg av viskoelastiskt skum i undersidan.

Sittgrop och urtag för benen fördelar trycket mot lårens undersida, ger en bra sittposition, god avlastning för sittbensknölar samt minskad risk för skjuvkrafter. Med urtag för ryggör och rundad bakkant ger den även en bra passform i rullstolen. Komforten hos Curera® Plantur passar personer som sitter både längre och kortare tid.

Curera® Plantur har ett vätsketätt ytskikt som inte släpper igenom vätskor samt är lätt att rengöra. Med dynan följer ett slitstarkt överdrag av grå polyesterplysch med god friktion. Samtliga sittdynor och överdrag innehåller inte några bromerade flamskyddsmedel eller latex.



Curera® Plantur med standardöverdrag


TILLGÄNGLIGA ÖVERDRAG

Standardöverdrag

Följsamt material på ovansidan som motverkar glid. Undersida i antiglid.

Hygienöverdrag

Vätsketätt, ångpermeabelt överdrag som är elastiskt och följsamt. Undersidan i antiglid.

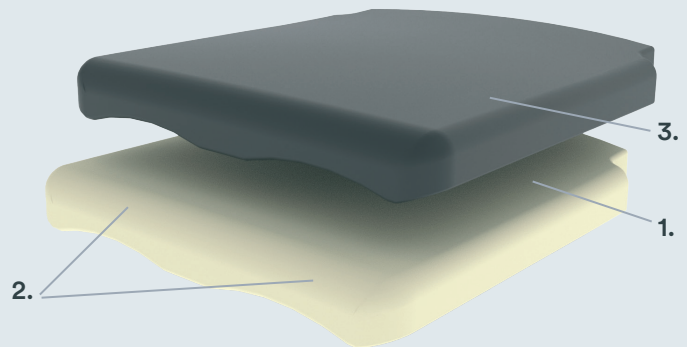

1. SITTGROP
2. URTAG FÖR BEN
3. VÄTSKETÄTT YTSKIKT



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

 <small>Care of Sweden är registrerade varumärken för Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 2026-01-23.</small>	EGENSKAPER	FAKTA
	<ul style="list-style-type: none">• Enkel att rengöra• Plan yta	<ul style="list-style-type: none">• Höjd: 5 cm• Garanti: 2 år• Material i dyna: Polyuretanskum, viskoelastiskt skum, vulkaniserat gummi• Material i överdrag: Polyester och Polyuretan• Klassificering: ISO-kod 122506-03 - Tryckfördelande• Brand: SS-EN 1021-1, SS-EN 1021-2, ISO 7176-16

PASSFORMSGUIDE:

(Rekommenderad max brukarvikt i kg och tillgängliga standard storlekar. Fler storlekar går att beställa. Vänligen kontakta vår kundtjänst.)

Bredd cm							
Djup cm	35	37	40	42	45	47	50
35	70		125				
40	70	100	125	125	125	150	150
42			125	125			
45	70	100	125	125	125	150	150
50		125	125	125	125	150	150

OBS!!

Tänk på att mäta där pilarna visar.

