

# Curera® Stödkil

För positionering och lägesändring

Rörelse är en skyddsmekanism mot trycksår och övriga sänglägeskomplikationer. Individer med nedsatt känsel, nedsatt rörlighet och/eller medvetandesänkning kan sakna förmågan att agera på de varningssignaler kroppen sänder ut, såsom smärta eller obehag.

I dessa situationer kan individen behöva stöd och avlastning i liggande och sittande läge. Vår produktserie med positioneringskuddar används som hjälpmedel för att tryckavlasta och ge stöd i samband med positionering och lägesändring, både för individ och vårdgivare. Små lägesändringar som genomförs ofta räcker för att hålla igång blodcirkulationen<sup>(1)</sup>, vilket minskar risken för trycksår.

## Exempel på positionering



Curera® Stödkil är en mångsidig kudde som kan användas vid viloposition för att avlasta skuldra, sacrum, höft och häl.

Curera® Stödkil kan även användas för att minska risken för skjuv vid halvsittande position genom att placera stödkilen under knäna.

## Överdrag för komfort och hygien

Curera® Stödkil levereras med ett vätsketätt hygienöverdrag för enkel rengöring.

Det vätsketäta hygienöverdraget är tillverkat i ett tyg med fyrvägsstretch<sup>(2)(3)</sup> för att minska risken för skjuvkrafter, samt är ånggenomsläppligt<sup>(4)</sup> för att reducera risken för hudmaceration. Hygienöverdraget har även en vätsketät dragkedja.

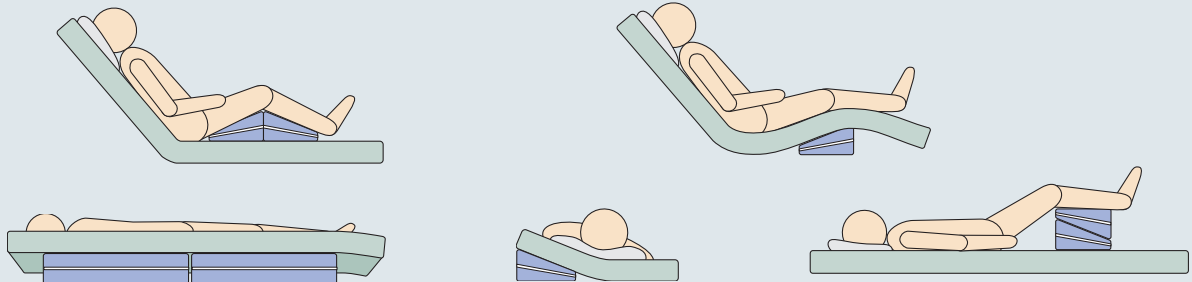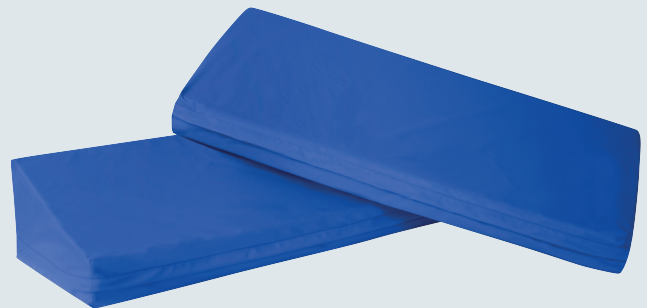

## Teknisk specifikation

Fyllning	100 % kallskum
Storlekar	70 x 26 x 15/5 cm, 50 x 26 x 15/5 cm
Tillgängliga överdrag	Hygienöverdrag (polyuretanbelagd polyester)
Instruktion för rengöring	Hygienöverdraget avtorkas med rengörings-och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C.
CE-märkning	Registrerad och CE-märkt i enlighet med MDR (EU) 2017/745

## Referenser

- (1) Lindholm, C. (2018). Sår (4 uppl). Studentlitteratur.
- (2) CDC (2003), Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care facilities, updated 2019.
- (3) SS 876 00 20:2017, Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements.
- (4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.



Läs alltid bruksanvisningen innan användning.

Care of Sweden and Curera are trademarks of Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2026. All rights reserved. Last update: 2026-01-19.

