

Optimal M3

Ersättningsmadrass av god kvalitet



Optimal M3 med överdrag Marin

FAKTA	STORLEKAR
Kärna: kallskum 50 kg/m³ Höjd: 12 cm Rekommenderad brukarvikt: upp till 180 kg Brand: EN 597-1, -2 Garanti: 3 år Rengöring av överdrag: avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.	80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm. Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Optimal M3

Optimal M3 är en ersättningsmadrass som används i alla typer av vårdmiljöer. Madrassen har en tvådelad madrasskärna med hög densitet och levereras med hygienöverdrag Marin, Steel/Evac eller Skandic.

Det mjuka och elastiska hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att rengöra och med en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.

Evac-överdraget är delbart med tvådelad dragkedja och utrustat med funktionshandtag för evakuering. Hygienöverdrag Marin är avtagbart med dragkedja på ena kortsidan.


Optimal M3 tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet⁽²⁾⁽³⁾.

REFERENSER

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.

(2) SS 876 00 20:2017, Sjukvårdstextil-Madrasser-Specifikationer och krav.

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och behandling. <https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/> (2021-04-07).

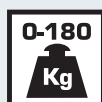

Läs alltid bruksanvisningen innan produkten används.

Care of Sweden och CuroCell är varumärken som tillhör Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2021. Med ensamrätt. Senaste uppdatering: 2026-06-02.

FUNKTIONER OCH EGENSKAPER	VALBARA ÖVERDRAG
Tryck Högelastiska kvalitetsmaterial med tryckutjämning som ger en god komfort. Skjuv Madrassen är speciellt konstruerad för att minska påverkan av skjuvkrafter. Fukt Hygienöverdraget är ångpermeabelt⁽¹⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Hygien Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en god hygienisk standard⁽²⁾⁽³⁾.	Hygienöverdrag Marin Droppskyddad dragkedja på en sida. Hygienöverdrag Steel/Evac Tvådelat evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt handtag på långsida. Toppdel Steel har svetsade sömmar. Hygienöverdrag Skandic Svetsat överdrag med vätskeskyddad dragkedja på en sida.